



SUPER ETCH

GEL GRABADOR CON ACIDO FOSFICO AL 37%



REGULAR
DE BAJA
VISCOSIDAD

PROMUEVE UNA POTENTE ADHESIÓN AL 37%

Super Etch con ácido fosfórico al 37% es un agente grabador para esmalte y dentina

Super Etch es un gel fácilmente controlable que fluye según la dirección de la aplicación, no por la gravedad

ALTA VISIBILIDAD

GEL DE COLOR AZUL



ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%

El ácido fosfórico al 30 ó 40% produce un grabado óptimo en 15 a 20 segundos ^[1]. Una concentración más baja requerirá de un mayor tiempo de contacto, retrasando innecesariamente los procedimientos.

PERFECTO PARA ESMALTE

La alta viscosidad de Super Etch y su control de fluidez permite una colocación ideal. Es perfecto para aplicación en esmalte con localización específica.

GEL DE COLOR AZUL

Excelente visibilidad para mejorar la colocación.

GEL TIXOTRÓPICO

Sin efecto caída, Super Etch ofrece las mejores condiciones de colocación. Agitar el gel si quiere disminuir la viscosidad.

AGENTE GRABADOR INCOLORO

También se encuentra disponible un líquido grabador incoloro al 37% para aquellos pacientes que padecen de alergia a los tintes.

SUPER ETCH EN JERINGA

Super Etch ofrece una jeringa fácil de usar, libre de pérdidas. La extrusión directa permite acelerar los procedimientos, una económica aplicación y un fácil acceso a áreas difíciles de alcanzar.

SUPER ETCH

Super Etch crea microporos en la superficie del esmalte y elimina la capa de manchas para desbloquear los túbulos dentinarios. Promueve la penetración adhesiva de la resina y la formación de cuñas resinosas. Super Etch es vital para la retención mecánica de la restauración.

PUNTAS DE APLICACIÓN PARA JERINGAS SUPER ETCH

Puntas Super Etch - puntas retas - bitola 23.

[1] Reality, Volume 13, 1999, 1-232.


INSTRUCCIONES

PARA LA APLICACIÓN DIRECTA EN TODAS LAS RESTAURACIONES

SUPER ETCH DE VISCOSIDAD REGULAR

1 Limpie y aíste el diente

2 Grabe la superficie del diente por 20 segundos con Super Etch a base de ácido fosfórico al 37%

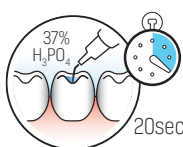

3 Lave minuciosamente con agua


4 Elimine el exceso de agua. Manténgalo humedecido

5 Aplique el adhesivo Stae para esmalte / dentina saturando todas las superficies internas, o un agente adhesivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante



6 Sople suavemente con aire seco y libre de aceites por 2 segundos para evaporar el solvente. Deje una superficie brillante

7 Fotocúrelo por 10 segundos

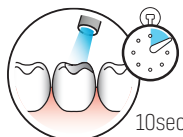

8.1 Aplique un composite fluido que libere flúor tal como Wave / Wave MV / Wave HV



8.2 Aplique Aura (para anteriores/posteriores) composite



9 Fotocúrelo por 20 segundos en incrementos de 2mm

10 Pulido y acabado

INDICACIONES

ácido grabador para dentina y esmalte

Muy apropiado para uso en esmalte

EN CONJUNCIÓN CON TODOS LOS

Adhesivos

Composites

Compómeros

Ionómeros de vidrio

Sellantes

Cementos

PARA LIMPIAR

Porcelana

LA VARIEDAD DE GRABADORES SDI ESTÁ COMPUESTA POR:

	mL	g
Gel Super Etch en jeringa	1.2 mL	1.5 g
Gel Super Etch en jeringa	2 mL	2.5 g
Gel Super Etch en jeringa	5 mL	6.25 g
Gel Super Etch en jeringa	9.6 mL	12 g
Gel grabador en frasco	15 mL	18.75 g
Jeringa Jumbo Super Etch	25 mL	31.25 g

REFERENCIAS DE PEDIDOS

SYRINGES

Jeringa Super Etch de 12g

1 Jeringas de 9.6mL (12g)
25 puntas de aplicación desechables **8100052**

2 Jeringas Jumbo Super Etch de 25mL

2 Jeringas Super Etch de 25mL
(62.5g) 50 puntas de aplicación
desechables **8100059**

KITS

Bulk Kit Super Etch

Jeringas de 10 x 2mL (2.5g)
50 puntas de aplicación desechables **8100045**

Kit Super Etch

Jeringas de 3 x 2mL (2.5g)
25 puntas de aplicación desechables **8100040**

TIPS

Puntas de Aplicación Desechables para Jeringas Super Etch

25 puntas de aplicación desechables, calibre 23 **8100050**

200 puntas de aplicación desechables, calibre 23 **8100060**

GEL

GGel Grabador, Azul

1 Botella de gel grabador de 15mL
(18.75g) **8100020**



YOUR SMILE. OUR VISION.



03-2026

M810004 F



DepoDent Depósito Dental

Oficinas comerciales
Castellón -- Tarragona

ventas@depodent.es
Tel.central +34 911 973 174
WhatsApp 603 588 999
<https://depodent.es>

Distribución Territorio Nacional

Zona: Cataluña - Aragón
Zona: Centro Peninsular
Zona: Norte Peninsular
Zona: Levante - Baleares
Zona: Andalucía - Extremadura