



# **zeta 3 wip** **POP-UP**

SURFACES

**TOALLITAS GRANDES Y GRUESAS PARA UNA DESINFECCIÓN EFICAZ Y RÁPIDA DE TODAS LAS SUPERFICIES DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS**



## **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- ✓ Toallitas más gruesas, de grandes dimensiones: limpieza y desinfección de superficies más amplias en menos tiempo y con menor consumo de toallitas
- ✓ Amplio campo de acción
- ✓ Tejido de alta resistencia, suave y compacto
- ✓ Muy bajo contenido de alcohol (< 3%): óptima compatibilidad con los materiales, incluidos los más delicados
- ✓ Agradable fragancia a la menta fresca
- ✓ Práctico formato softpack salva espacio
- ✓ Dermatológicamente testadas
- ✓ Dispositivo médico de clase IIa conforme con la Directiva relativa a los dispositivos médicos 93/42/CEE

**Clinical**  
Surface disinfectants

**Zhermack**  
CLINICAL



# zeta 3 wipes **POP-UP**

SURFACES

## INDICACIONES

Ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies de dispositivos médicos, incluidas aquellas más sensibles como los equipos dentales en piel (natural/artificial) y superficies en plexiglass.

## MODO DE USO

Limpiar minuciosamente la superficie con la toallita asegurándose de pasarla de modo uniforme y dejarla actuar.



Quitar el precinto de inviolabilidad y sacar una toallita **zeta 3 wipes POP-UP**.



Frotar con la toallita la superficie a desinfectar.



Dejar actuar como mínimo durante 5 minutos y dejar secar.



Volver a cerrar bien el envase.

## CAMPO DE ACCIÓN

**Bactericida:** EN 1040, EN 1276, EN 14561, EN 13697\*\*;

**Fungicida:** (A. niger) EN 1275, EN 13697\*\*

**Levaduricida:** (C. albicans) EN 1275, EN 1650, EN 13624\*\*, EN 13697\*\*


**Virucida\*:** EN14476 H. Simplex virus (HSV) y H1N1\*\*

En 5 minutos en condiciones de suciedad.

\*En 1 minuto \*\*En condiciones de limpieza

## PRINCIPIOS ACTIVOS

**Zeta 3 wipes POP-UP** están impregnadas con una solución desinfectante que contiene:  
**sales de amonio cuaternario**  
**alcoholes (< 3%)**

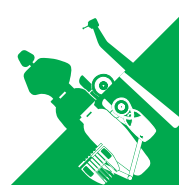

# DepoDent

## CONFECCIONES

**C810064**

Envase de 100 toallitas húmedas

### BRANCHES

**GERMANY**  
Zhermack GmbH  
Deutschland  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl  
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0  
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
zhermack.com

**POLAND**  
Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska  
Tel. +48 - 22 858 82 72  
+48 - 22 858 73 41  
Fax +48 - 22 642 07 14  
biuro@zhermapol.pl  
zhermapol.pl

**USA**  
Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195  
Tel. +1 - (877) 819 6206  
+1 - (732) 389 8540  
Fax +1 - (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
zhermackusa.com

### COUNTRY CONTACTS

**UK AND IRELAND**  
Tel. +44 - (0)7870 690 811  
uk@zhermack.com

**SPAIN**  
Tel. +34 - 900 99 39 52  
info.spain@zhermack.com

**FRANCE**  
Tel. +33 - 0800 915 083  
info.france@zhermack.com

**RUSSIA**  
Tel. +7 - 916 930 1191  
info.russia@zhermack.com

**MEXICO AND CENTRAL AMERICA**  
Tel. +52 - 1 55 919 804 97  
info.mexico@zhermack.com

**SOUTH AMERICA**  
Tel. +57 - 310 2601 777  
info.colombia@zhermack.com