IMPLANTOLOGIE

IMPLANTOLOGY
IMPLANTOLOGIE
IMPLANTOLOGÌA

Hammer für Implantologie

Implantological hammer / Marteau pour l'implantologie / Martillo para implantologìa



1795
25cm
Hammer für Knochenschlagdose
OMBREDANNE
rostfrei, Gewicht: 720g
Hammer acc. to Ombredanne
for bone centrifuge, rustfree, weight: 720g
Maillet d'après Ombredanne pour boîte de broyage des os inoxydable, poids: 720g
Martillo según Ombredanne para recipiente de martilleo de hueso inoxidable. peso: 720g





1796A
Ersatzbacken, 1 Paar
Spare beaks, 1 pair
Becs de remplacement, 1 paire
Extremos de recambio 1 Par

1796
18cm
Hammer für implantologische Zwecke mit Kunststoffbacken
MEAD
Implantological hammer
acc. to MEAD with plastic beaks
Marteau pour l'implantologie
selon MEAD avec des becs en plastique
Martillo para implantología
MEAD con extremos de plástico



1796S
16cm
Hammer mit sterilisierbaren (Autoklav) Kunststoffbacken
Hammer with sterilizable (autoclavable) plastic beaks
Marteau avec des becs en plastique stérilisables (autoclave)
Martillo con extremos de plástico esterilizables (autoclave)

Gewebepinzetten, Membranpinzetten

Dental tissue tweezers, Membrane tweezers / Pinces à tissu, Pinces à membrane / Pinzas para tejido, Pinzas para membrana



785TC/12
12cm
ADSON

Anatomische Pinzette mit TC n. ADSON
mit Hartmetalleinlagen (TC), zum atraumatischen Abhalten / Halten dünner Gewebelappen oder zum sicheren Festhalten von Membranen beim Zuschnitt

Anatomical tweezers with tungsten carbide (TC) inserts for retracting / gripping thin tissue flaps atraumatically or grasping membranes firmly while cutting

Précelle anatomique avec incrustation de métal dur (carbure de tungstène) pour un écartement / maintien atraumatiaque de lambeaux fins ou pour un maintien ferme de la membrane lors de la découpe

Pinzas anatómicas de carburo tungsteno (TC) para una sujeción / retención atraumática de los tejidos finos o para una sujeción segura de la membrana en el corte



LS792DE-TC/16
16cm



LS781TC/18
18cm
GERALD



LS781ATC/18
18cm
GERALD

LS = Ø 9,5MM LIQUIDSTEEL

Implantatreiniger, Knochenschaber

Implant cleaner, Bone Scraper/Curettes pour implant, Ciseaux à os/Raspador para la limpieza de implantes, Raspador de hueso

TI **TITAN**





LSTI960/4R-4L
Implantatreinigungskürette mit Titan-Spitzen
Implant cleaning curette with titanium tips
Curettes pour implant avec des extrémités en titane
Cureta para la limpieza de implantes con puntas de titanio

TI **TITAN**





LSTI972/H6-H7
Implantatreinigungsscaler mit Titan-Spitzen
Implant cleaning scaler with titanium tips
Curettes pour implant avec des extrémités en titane
Raspador para la limpieza de implantes con punta de titanio

Dieses Instrument erlaubt eine schnelle und dosierte Knochenentnahme nahe der zu inserierenden Stelle. Mit den hochwertig gehärteten Schneiden wird ein schonender und gezielter Knochenabtrag in feine Scheiben (Lamellen) ohne zu großen Kraftaufwand ermöglicht. Zur Beibehaltung einer optimalen Schärfe empfehlen wir, die Schneiden nach jeder Behandlung (vor der Sterilisation) mit einem Arkansasstein (CM Nr. 995) nachzuschleifen.



This instrument allows rapid and measured bone removal close to the insertion site. The high-quality hardened blades enable bone to be removed gently and deliberately in thin layers without excessive force. To maintain optimal sharpness, we recommend grinding the blades with an Arkansas stone (CM no. 995) after each use (prior to sterilisation).

Cet instrument permet un enlèvement rapide et bien dosé d'os à proximité du site implantaire. À l'aide des lames parfaitement bien trempées, un enlèvement précis et non traumatique de fines lamelles d'os est réalisable sans effort important. Pour préserver le tranchant optimal, nous conseillons de réaffûter les lames après chaque utilisation (avant la stérilisation) en se servant d'une pierre d'Arkansas (CM n° 995).

Este instrumento permite una remoción del hueso rápida y dosificada cerca del lugar donde se va a insertar. Con los duras hojas de corte de alta calidad se hace posible una abrasión del hueso cuidadosa y precisa en finas láminas sin demasiado esfuerzo. Para mantener una precisión óptima, recomendamos afilar el instrumento después de cada uso (antes de la esterilización) con una piedra de Arkansas (CM Nr. 995).



LS1915/6-24G



LS1915/4-6

LS = Ø 9,5MM

Knochenschaber

Bone scraper / Ciseaux à os / Raspador de hueso

KNOCHENSCHABER
- dient zur schnellen und einfachen Gewinnung von autologem Knochenmaterial
- die Klinge ermöglicht die Gewinnung von kortikalem und spongiösem Knochen
- der gewonnene Knochen wird in der Kammer gesammelt und mit Blut vermischt
- auf Hilfsinstrumente wie Knochenfilter, Trepanbohrer oder Sägen kann im Normalfall verzichtet werden
- ergonomisch perfektes Design


BONE SCRAPER
- fast and simple generation of autologous bone materials
- the blade enables the generation of cortical and spongeous bones
- the recovered bone is collected in the chamber and mixed with blood
- one can in the norm do without tool aids such as bone filter, drilling awl or saws
- ergonomically perfect design

CISEAUX À OS
- sert à l'obtention simple et rapide d'un matériau osseux autologue
- la lame permet d'obtenir des os spongieux et corticaux
- l'os ainsi obtenu est collecté dans le petit compartiment et mélangé à du sang
- en situation normale, vous pouvez renoncer aux accessoires comme filtre à os, foret trépan ou scies
- design parfaitement ergonomique

RASPADOR DE HUESO
- sirve para la obtención rápida y fácil de material óseo autólogo
- la cuchilla permite la obtención de hueso cortical y espongioso
- el hueso obtenido es recogido en la cámara y mezclado con sangre
- en caso normal se puede prescindir de instrumentos auxiliares como filtros óseos, fresas de trepanación o sierras
- diseño perfectamente ergonómico



LS1920/1
gerade/straight
droits/rectas

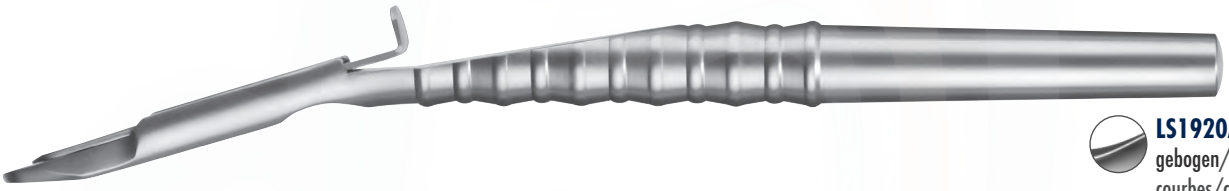

LS1920A/1
gebogen/curved
courbes/curvas





**ERSATZKLINGEN/
REPLACEMENT BLADES**

LS1920/2
gerade/straight/droits/rectas
für/for/pour/para LS1920/1

LS1920A/2
gebogen/curved/courbes/curvas
für/for/pour/para LS1920A/1

LS1920-SET
Inhalt/Content/Contenu/Contenido:
1x LS1920/1, 2x LS1920/2

LS1920A-SET
Inhalt/Content/Contenu/Contenido:
1x LS1920A/1, 2x LS1920A/2

Knochenmaterial Instrumente

Instruments for bone material / Matière osseuse Instruments / Instrumentos para material óseo

Instrument zum Einbringen von Knochenmaterial
- Mit dem Löffel kann das Knochenmaterial der Knochenmischdose schnell und sicher entnommen werden. Danach wird an entsprechender Stelle appliziert.

Instrument for introducing bone material
- The bone can be removed from the bone mixer tin quickly and safely with the curette. It is then applied to the appropriate site.

Instruments pour la mise en place de matériaux osseux
- La curette permet de prendre rapidement et en toute sécurité le matériau osseux de la cupule de mélange, puis de l'appliquer à l'endroit prévu.

Instrumento para la recolección de material óseo
- Con la cucharilla se puede recoger el material óseo del vaso de mezcla ósea de forma rápida y segura. Después se aplica en el lugar correspondiente.



1601
⌀ 10mm

Ergoform **Ø 8MM** **LS = Ø 9,5MM**

DepoDent Suministros Dentales Tel. central 911 976 174 - WhatsApp 603 588 999 https://depodent.es

Knochenmaterial Instrumente

Instruments for bone material / Matière osseuse Instruments / Instrumentos para material óseo



LS1602



für große Füllungen bei externem Sinuslift
for large fillings in external sinus-lifting
pour les obturations volumineuses dans les sinus lifts externes
para grandes rellenos en elevaciones de seno externo

LS1051/54
Titanoxid Beschichtung
Titanium oxide coating
Revêtement en oxyde de titane
Revestimiento de dióxido de titanio


Knochenmühle, rostfrei mit TITAN Mahlwerk
- die TITAN Backen sind austauschbar
- hohe Stabilität und leichte Handhabung
- müheloses Reinigen möglich

Bone Mill, rustfree with Titanium millworks
- the Titanium jaws are exchangable
- high stability and easy handling
- effortless cleaning

Moulin à os, inoxydable avec rouage en TITANE
- les patins en TITANE sont échangeables
- stabilité élevée et manipulation facile
- nettoyage facile possible

Molino óseo, inoxidable con sistema de moler en titanio
- las puntas en titanio son cambiables
- alta estabilidad y fácil manejo
- limpiable sin problemas

TI TITAN

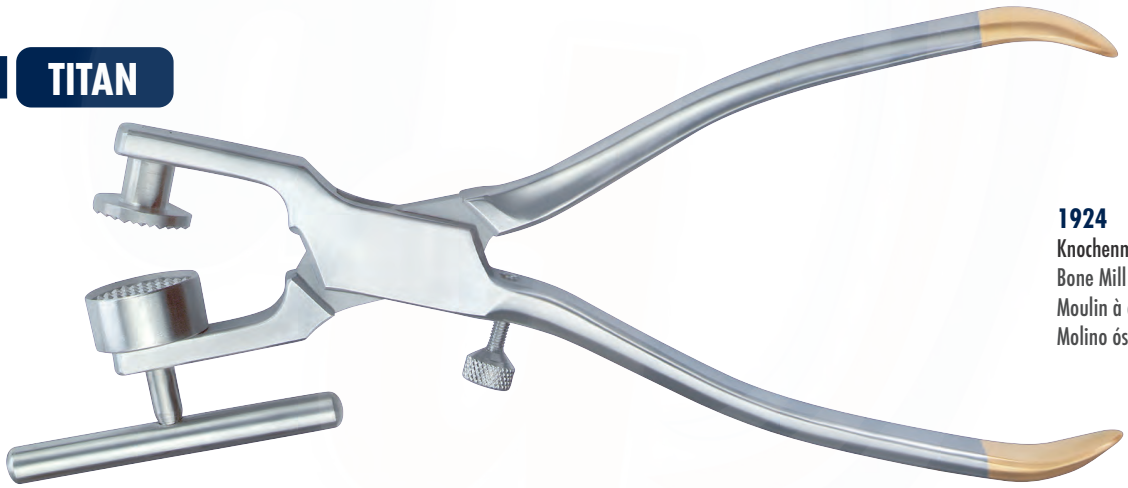

1924
Knochenmühle
Bone Mill
Moulin à os
Molino óseo



1922
Osteometer - Messzange zur Kieferkammbreitenmessung, Skala beidseitig, rostfrei
Osteometer - Measuring forceps for jaw ridge width measurement, scale on both sides, rustfree
Ostéomètre - Davier pour la mesure de la largeur de la crête alvéolaire, échelle des deux côtés, inoxydable
Osteómetro - Pinza de medición para medir el ancho de la cresta alveolar, escala bilateral, inoxidable

LS = Ø 9,5MM

Knochenschlagdose, Knochenmischdose

Bone Percussion Tin, Bone Mixer Tin / Boite de broyage des os, Boite de mélange pour os / Recipiente para martilleo de hueso, Recipiente para mezcla de hueso

TITAN Knochenschlagdose
- für längere Knochenstücke
- komplett aus TITAN gefertigt, wodurch bei der Augmentation des Knochenmaterials eine optimale Gewebeverträglichkeit (biokompatibel) gewährleistet ist.


Bone Percussion Tin
- for longer pieces of bone
- all Titanium to insure an optimal tissue compatibility (biocompatible).

Boîte de broyage des os
- pour les morceaux d'os plus longs
- entièrement fabriquée en TITANE, pour garantir une biocompatibilité idéale en cas d'augmentation du matériau osseux.

Recipiente para martilleo de hueso
- para piezas óseas mas largas
- fabricado completamente en titanio, por lo cual se garantiza una compatibilidad tisular (biocompatible) en la aumentación del material óseo.

TI **TITAN**



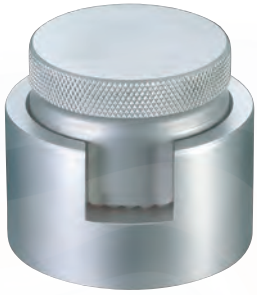

1923



4037
Medizinbecher, Edelstahl 50ccm
Medical beakers
Gobelet médical
Vasos médicos



4036
Medizinbecher, Edelstahl 25ccm
Medical beakers
Gobelet médical
Vasos médicos



4039
Medizinbecher, Edelstahl
Medical beakers
Gobelet médical
Vasos médicos



1921
Knochenmischdose
- rostfrei
Bone Mixer Tin
Mixing tin for bone investment
- rustfree
Boîte de mélange pour os
Boîte de mélange pour matériau osseux
- inoxydable
Recipiente para mezcla de hueso
Recipiente para mezcla de material óseo
- inoxidable

Sinuslift Instrumente

Sinus-lifting instruments / Instruments Sinus-Lift / Instrumentos Sinus-Lift

- Sinuslift(ing): Bezeichnung für eine Augmentationsmethode im unmittelbaren Bereich unterhalb der Kieferhöhle bei einem zurückgebildeten (atrophischen) Oberkiefer. Beim Sinuslift wird zunächst die Schneidersche Membran vom Knochen abgelöst und in den entstandenen Hohlraum autologer Knochen eingebracht
- Die Instrumente 1142/1 + 2 dienen zur Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut und gleichzeitiger Verschiebung nach cranio-medial in die Kieferhöhle

- Sinus-lifting: Describes an augmentation method in the immediate vicinity beneath the sinus in cases with atrophied mandibles. Sinus-lifting involves first releasing the mucous membrane of the nose from the bone and filling the remaining space with autologous bone
- Instruments 1142/1 and 2 are for raising and simultaneously displacing the sinus membrane cranio-medially in the sinus

- Soulèvement sinusal : Terme désignant une méthode d'augmentation intervenant à proximité immédiate du sinus pour le maxillaire (atrophique) présentant un volume osseux insuffisant. Avec le soulèvement du sinus, c'est d'abord la membrane muqueuse du plancher qui est décollée de l'os avant que l'espace ainsi obtenu soit comblé d'os autologue
- Les instruments 1142/1 + 2 servent en même temps à décoller la muqueuse sinusale et à la déplacer en direction cranio-médiane dans la cavité sinusale.

- Sinuslift(ing): Término que denomina un método de aumento en la zona que se encuentra directamente bajo el seno maxilar en el caso de un maxilar superior atrofiado. Para la elevación del seno se separa primero la membrana de Schneider del hueso y en la cavidad creada se introduce hueso autólogo.
- Los instrumentos 1142/1 + 2 sirven para separar la mucosa del seno maxilar y desplazarla al mismo tiempo dentro del seno maxilar en dirección craneo-medial




1142/1
LS1142/1



1142/2
LS1142/2



1142/3
LS1142/3

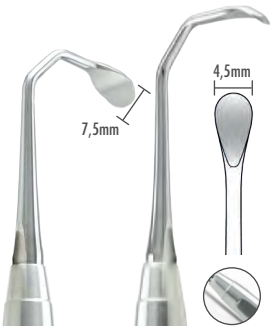

LSP1142/77SC



LSP1142/78



LSP1142/24S

Ergoform **Ø 8MM** **LS = Ø 9,5MM** LIQUIDSTEEL **LSP = Ø 9,5MM** LIQUIDSTEEL passion

Sinuslift Instrumente

Sinus-lifting instruments / Instruments Sinus-Lift / Instrumentos Sinus-Lift



LS1650/1
Elevatoren - Einfacher Winkel
Elevators - Single Angled
Élévateurs - Angulation simple
Separadores - angulación sencilla



LS1650/2
Elevatoren - Einfacher Winkel
Elevators - Single Angled
Élévateurs - Angulation simple
Separadores - angulación sencilla



LS1650/3
Elevatoren - Einfacher Winkel
Elevators - Single Angled
Élévateurs - Angulation simple
Separadores - angulación sencilla



LS1650/4
Elevatoren - Einfacher Winkel
Elevators - Single Angled
Élévateurs - Angulation simple
Separadores - angulación sencilla



LS1650/5
Elevatoren - Doppelter Winkel
Elevators - Double Angled
Élévateurs - Angulation double
Separadores - angulación doble



LS1650/6
Elevatoren - Doppelter Winkel
Elevators - Double Angled
Élévateurs - Angulation double
Separadores - angulación doble



LS1650/7
Elevatoren - Doppelter Winkel
Elevators - Double Angled
Élévateurs - Angulation double
Separadores - angulación doble



LS1650/8
Knochenlöffel + Stopfer Kugel
Bone spoon, condenser round
Cuillère à os - Chirurgicaux
Cuchara de hueso - quirúrgicos



LS1650/9
Knochenlöffel + Stopfer plan
Bone spoon, condenser plane
Cuillère à os - Chirurgicaux
Cuchara de hueso - quirúrgicos



LS1650/10
Stopfer/Kondenser, plan + halbrund
Condenser, plane + semi round
Applicateurs - Chirurgicaux
Cuchara de hueso - quirúrgicos

LS = Ø 9,5MM

DepoDent Suministros Dentales Tel. central 911 976 174 - WhatsApp 603 588 999 https://depodent.es

OSTEOTOME zur Ausformung des Implantatlagers

OSTEOTOMES for shaping the implant site / OSTEOTOME pour la préparation du site implantaire / OSTEOTOMO para la conformación del lecho del implante

KNOCHENMEISSEL
BONE SPLITTING
CISEAUX À OS
CINCEL DE HUESO

Markierung als Sicherheitszone
in verschiedenen Breiten erhältlich

Marking as safety zone
available in different widths

Marquage de sécurité épais à partir de 10mm
disponible en différentes largeurs

Marcación de zona de seguridad
disponible en diferentes anchos



doppelseitige Lasermarkierung
double sided laser marking
marquage de laser bilatéral
marcación de láser bilateral

KNOCHENSPREIZER (CONDENSER)
BONE SPREADER + BONE CONDENSER
EXPANSEUR
SEPARADOR DE HUESO

Lasermarkierung
Laser marking
Marquage au laser
Marcación de láser

Markierung als Sicherheitszone, in verschiedenen Breiten erhältlich konisch zulaufend, konvexe Arbeitsspitze

Marking as safety zone available in different widths, conical, convex working end

Marquage de sécurité épais à partir de 10mm
disponible en différentes largeurs Forme conique,
extrémité travaillante convexe

Marcación de zona de seguridad disponible con diferentes anchos Punta activa convexa con acabado en forma cónica



konvexes und stumpfes Arbeitsende
convex and blunt working end
Extrémité travaillante convexe et mate
Parte activa convexa y plana

KNOCHENSTÖSSEL (SINUTOM)
BONE PUSHER
TRÉPAN
IMPACTADOR DE HUESO

Lasermarkierung
Laser marking
Marquage au laser
Marcación de láser

Markierung als Sicherheitszone, in verschiedenen Breiten erhältlich zylindrisch, konkave und medium scharfe Arbeitsenden

Marking as safety zone available in different widths cylindrical, concave and medium sharp working tip

Marquage de sécurité épais à partir de 10mm
disponible en différentes largeurs
Extrémité travaillante tranchante, cylindrique, concave et médium

Marcación de zona de seguridad disponible con diferentes anchos. Punta activa cilíndrica, cónica y medio afilada



konkaves und medium-scharfes Arbeitsende
concave and medium sharp working end
Extrémité travaillante tranchante,
concave et médium
Parte activa cóncava y medio afilada

OSTEOTOM, Knochenmeißel

OSTEOTOM, Bone splitting / OSTEOTOME, Ciseaux à os / OSTEOTOMO, Cincel de hueso



doppelseitige Lasermarkierung
double sided laser marking
marquage de laser bilatéral
marcación de láser bilateral

- gerade oder gebogene Ausführung (gerade = Oberkiefer, gebogen = Unterkiefer)
- verschiedene Breiten von 3 bis 8mm, Empfehlung für Einzelzahnimplantate: bis 4mm Breite größere Kieferkammabschnitte: bis 8mm Breite
- Tiefenmarkierungen auf dem Meißel (schwarzer Bereich = Sicherheitsmarkierung ab 10mm)
- Empfehlung für den Einsatz: min. Kieferkammbreite von 2-3mm, min. Knochenhöhe von 10mm, max. Splittingtiefe bis 70 Prozent der Gesamtknochenhöhe

- straight or curved design (straight = maxilla, curved = mandible)
- different widths from 3 to 8mm, recommendation for single tooth implants: up to 4mm width, larger jaw segments: up to 8mm width
- depth markings on the osteotome (black region = safety marking above 10mm)
- recommendation for use: min. ridge width of 2-3mm, min. bone height on 10mm, max. splitting depth up to 70 percent of total bone height

- De forme droite ou coudée (droite = maxillaire supérieur, coudée = maxillaire inférieur)
- Disponible en différentes largeurs de 3 à 8mm, recommandées pour les implants unitaires: jusqu'à 4mm de large pour un segment de crête alvéolaire plus important: jusqu'à 8mm de large
- Marquage de profondeur sur le ciseau (zone noire = marquage de sécurité à partir de 10mm)
- Recommandations: largeur de crête minimale de 2-3mm, hauteur osseuse de 10mm au minimum, profondeur maximale jusqu'à 70% de la hauteur osseuse totale

- Diseño recto o angulado (recto = maxilar superior, angulado = maxilar inferior)
- Diferentes anchos que van desde los 3 hasta los 8mm, recomendado para implantes unitarios: hasta 4mm de ancho. Cresta alveolar de mayor tamaño: hasta 8mm de ancho
- Marcación de profundidad del cincel (zona más oscura = marcación de seguridad desde 10mm)
- Recomendación de uso: mín. cresta alveolar de 2-3mm, mín altura ósea de 10mm, mín. profundidad de separación hasta el 70 por ciento de la altura ósea total



1609/3
3mm



1609/4
4mm



1609/6
6mm



1609/8
8mm



1610/3
3mm



1610/6
6mm

DepoDent Suministros Dentales Tel. central 911 976 174 - WhatsApp 603 588 999 https://depodent.es

OSTEOTOM, Knochenstößel (Sinutom)


OSTEOTOM, Bone pusher / OSTEOTOMES, trépans / OSTEOTOMO, Impactador de hueso

- gerade oder bajonettförmige Ausführung (gerade = für Front- und Seitenzahnbereich) (gebogen = für Molarenbereich)
- verschiedene Breiten mit zylindrisch zulaufendem Arbeitsteil
- das Arbeitsteil ist konkav und mit einer medium-scharfen Arbeitskante versehen hierdurch lässt sich das Knochenmaterial unter die Kieferhöhlenschleimhaut bringen und verdichten

- straight or bayonet design (straight = for anterior and posterior tooth regions) (curved = for molar region)
- different widths with cylindrical working end
- the working tip is concave and has a medium sharp edge, which allows the bone to be pushed under the sinus mucosa and compressed

- De forme droite ou en baïonnette (droite = pour les dents des secteurs antérieurs et latéraux) (coudés = pour les molaires)
- disponibles en différentes largeurs avec partie travaillante cylindrique
- La partie travaillante est concave avec un tranchant médium, ce qui permet de mettre en place le matériau osseux sous la muqueuse alvéolaire et de le condenser

- Diseño recto o con forma de bayoneta (recto= para zona frontal y lateral) (angulado= para zona molar)
- Diferentes anchos con parte activa cilíndrica
- La parte activa es cóncava y con un afilado medio, mediante la cual se puede extraer y condensar el material óseo bajo la membrana del seno maxilar

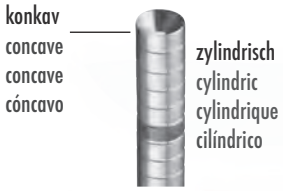



1606/2.2
Ø2,2mm
gerade
straight
droits
rectas



1606/2.8
Ø2,8mm
gerade
straight
droits
rectas



1606/3.5
Ø3,5mm
gerade
straight
droits
rectas



1606/4.2
Ø4,2mm
gerade
straight
droits
rectas



1606/4.8
Ø4,8mm
gerade
straight
droits
rectas



1605/2.2
Ø2,2mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1605/2.8
Ø2,8mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1605/3.5
Ø3,5mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1605/4.2
Ø4,2mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1605/4.8
Ø4,8mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado

OSTEOTOM, Knochenspreizer (Condenser)


OSTEOTOM, Bone spreader + bone condenser / OSTEOTOME, Expanseur / OSTEOTOMO, Separador de hueso

- gerade oder bajonettförmige Ausführung (gerade = für Front- und Seitenzahnbereich) (gebogen = für Molarenbereich)
- konvexes und stumpfes Arbeitsende
- verschiedene Breiten mit konisch zulaufendem Arbeitsteil – die unterschiedlichen Breiten sind so aufeinander abgestimmt, dass die breiteste Stelle (schwarze Markierung) am Arbeitsende, dem Durchmesser des darauffolgenden Instrumentes an der Arbeitsspitze entspricht. Hierdurch ist eine kontinuierliche Erweiterung der Knochenkavität gewährleistet. Darüber hieraus lässt sich eine gute Verdichtung spongiöser Knochenstrukturen (insbesondere bei weichem Knochen der Konsistenz D3-D4 und D5) zur Verbesserung der Primärstabilität herstellen.

- straight or bayonet design (straight = for anterior and posterior tooth regions) (curved = for molar region)
- convex and blunt working tip
- different widths with conical working end – the different widths are coordinated so that the widest part (black marking) at the working end corresponds to the diameter of the next instrument at the working tip. This ensures continuous expansion of the bone cavity. Moreover, good compression of cancellous bone can be obtained to improve primary stability (especially in the case of soft bone of consistency D3-D4 and D5).

- De forme droite ou en baïonnette (droite = pour les dents des secteurs antérieurs et latéraux) (coudés = pour les molaires)
- Extrémité travaillante convexe et mate
- Disponibles en différentes largeurs avec partie travaillante conique et convexe - Les différentes largeurs sont disposées de telle sorte que la zone la plus large (marque noire) au niveau du col de l'instrument corresponde au diamètre de l'extrémité travaillante de l'instrument suivant. Ainsi, un élargissement continu de la cavité osseuse est garanti. De plus, il est possible de réaliser une bonne condensation de l'os spongieux (en particulier pour des os mous de consistance D3-D4 et D5) afin d'améliorer la stabilité primaire.

- Diseño recto o con forma de bayoneta (recto= para zona frontal y lateral) (angulado= zona molar)
- Parte activa plana y convexa
- Distintos anchos con parte activa cónica - los diferentes anchos están coordinados de modo que el lugar más ancho (marca negra) en la parte activa, se corresponda con el diámetro del siguiente instrumento que se va a utilizar en la punta activa. Así se garantiza un ensanchamiento continuado de la cavidad ósea. De esta forma se puede lograr una buena compresiónde las estructuras de hueso esponjoso (especialmente en huesos blandos de consistencia D3-D4 y D5 para conseguir una mejora de la estabilidad primaria

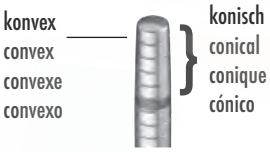



1608/2.2
Ø2,2mm
gerade
straight
droits
rectas



1608/2.8
Ø2,8mm
gerade
straight
droits
rectas



1608/3.5
Ø3,5mm
gerade
straight
droits
rectas



1608/4.2
Ø4,2mm
gerade
straight
droits
rectas



1608/4.8
Ø4,8mm
gerade
straight
droits
rectas



1607/2.2
Ø2,2mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1607/2.8
Ø2,8mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1607/3.5
Ø3,5mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado




1607/4.2
Ø4,2mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado



1607/4.8
Ø4,8mm
gewinkelt
angled
coudé
angulado

OSTEOTOM-SET, Knochenstößel (Sinutom)

OSTEOTOM-SET, Bone pusher / SET D'OSTEOTOMES, Trépans / SET DE OSTEOTOMOS, Impactador de hueso

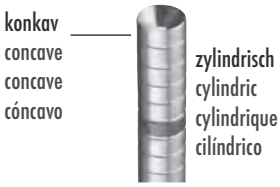



1605-SET




Tray **3029-L-WE**
280 x 190 x 34mm



1605/2.2	1605/2.8	1605/3.5	1605/4.2	1605/4.8	1606/2.2	1606/2.8	1606/3.5	1606/4.2	1606/4.8
Ø2,2mm	Ø2,8mm	Ø3,5mm	Ø4,2mm	Ø4,8mm	Ø2,2mm	Ø2,8mm	Ø3,5mm	Ø4,2mm	Ø4,8mm

OSTEOTOM-SET, Knochenspreizer (Condenser)

OSTEOTOM-SET, Bone spreader + bone condenser / SET D'OSTEOTOMES, Expanseur / SET DE OSTEOTOMOS, Separador de hueso

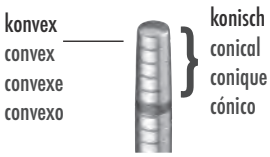



1607-SET



Tray **3029-L-WE**
280 x 190 x 34mm



1607/2.2	1607/2.8	1607/3.5	1607/4.2	1607/4.8	1608/2.2	1608/2.8	1608/3.5	1608/4.2	1608/4.8
Ø2,2mm	Ø2,8mm	Ø3,5mm	Ø4,2mm	Ø4,8mm	Ø2,2mm	Ø2,8mm	Ø3,5mm	Ø4,2mm	Ø4,8mm

OSTEOTOM-SET, Knochenmeißel

OSTEOTOM-SET, Bone splitting / SET D'OSTEOTOMES, Ciseaux à os/ SET DE OSTEOTOMOS, Cincel de hueso



doppelseitige Lasermarkierung
double sided laser marking
marquage de laser bilatéral
marcación de láser bilateral



1609-SET



Tray **3029-L-WE**
280 x 190 x 34mm



1609/3
3mm
gerade
straight
droits
rectas



1609/4
4mm
gerade
straight
droits
rectas



1609/6
6mm
gerade
straight
droits
rectas



1609/8
8mm
gerade
straight
droits
rectas




1610/3
3mm
gebogen
curved
courbés
curva



1610/6
6mm
gebogen
curved
courbés
curva

iNNovations

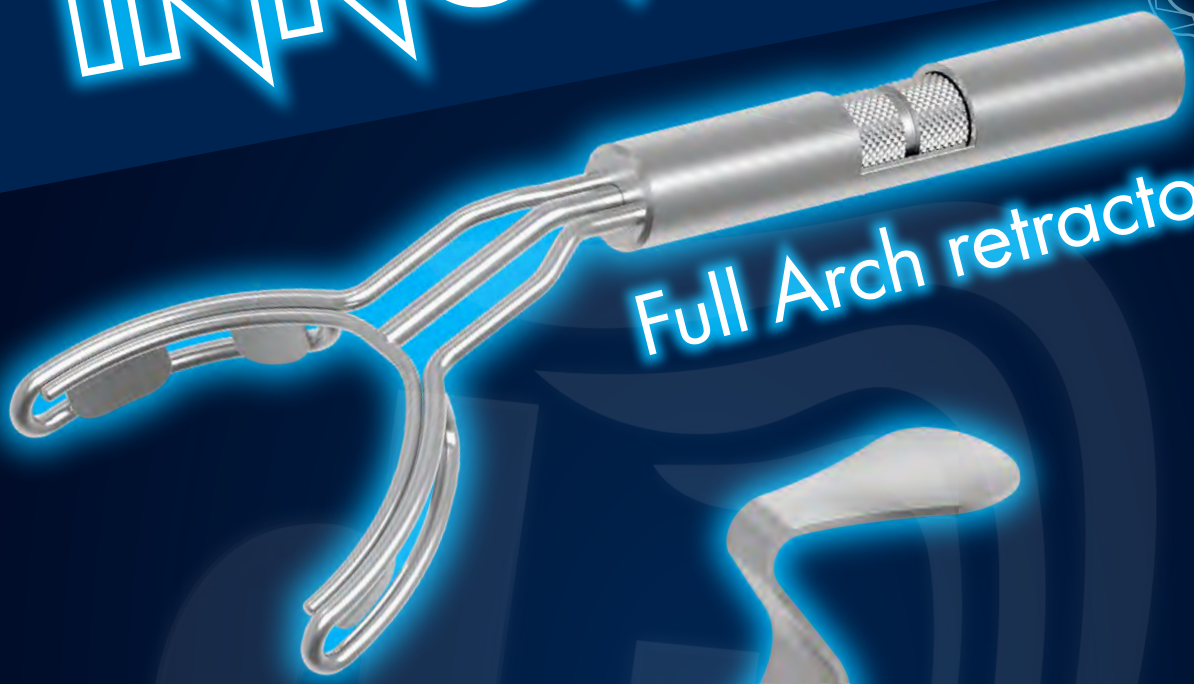

Full Arch retractor



Double hook retractor



Zygoma retractor