Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones. ES

PATTERN RESIN™ LS

RESINA ACRÍLICA PARA MODELADO

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las aplicaciones recomendadas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

(1) Para hacer modelado de:
- coronas cónicas y telescópicas.
- incrustaciones, barras palatinas y linguales, conectores y ganchos.
- Puente Maryland.

(2) Ferula provisional para soldar.
(3) En boca para reconstrucción de muñones.
(4) Construcción de supraestructuras de implantes.

CONTRAINDICACIONES

En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Suspenda el uso del mismo si observa reacciones alérgicas.

ADVERTENCIA

Contiene Metil-Metacrilato. Cuando se use directamente en boca para reconstrucción de muñones debe tenerse mucho cuidado para evitar el contacto con los tejidos o la mucosa oral. En caso de contacto accidental, retire inmediatamente el material y limpie perfectamente el área afectada con agua.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Dispensado de polvo y líquido
Administre las cantidades adecuadas de polvo y líquido en cada vaso de goma (Fig. 1).

2. Construcción del recubrimiento (para modelos de coronas secundarias de coronas telescópicas)
a) Humedezca la punta del pincel con el líquido y recoja una pequeña cantidad de polvo (Fig. 2).
b) Deposite esta mezcla en la corona y construya progresivamente el modelo de la corona secundaria repitiendo el procedimiento (Fig. 3).
- En este caso no es necesario un separador, pero cuando se trabaja con un modelo de escayola, debe usarse como tal GC Acro Sep, GC MULTI-SEP o vaselina.
- Limpie el pincel con líquido tras el uso o durante el trabajo si fuera necesario.

3. Comprobación de la superficie interna del modelo
Tras el fraguado de la resina (3 min. a 23°C/73°F), retire el modelo cuidadosmente de la corona interna y compruebe los márgenes y la superficie interna (Fig. 4).

4. Ajuste correcto
a) Vuelva a colocar el modelo en la corona interna y de un espesor uniforme (0.3-0.4 mm) utilizando una fresa (Fig. 5).
b) Retire el modelo y compruebe el espesor con un instrumento de medida (Fig. 6).

5. Encerado y recorte
a) Lleve a cabo el encerado usando cera para incrustaciones (Fig. 7).
Nota: No es necesario limpiar la superficie del modelo de resina con un agente limpiador antes de encerar.
b) Recorte la carilla para el facetado (Fig. 8).
c) Coloque las perlas de retención (Fig. 9).

6. Revestimiento, quemado y colado
Para una sola corona, todos los procedimientos pueden llevarse a cabo de la manera habitual. Para un modelo mayor, deje a 250°C (482°F) durante 1 hora antes de aumentar a la temperatura final (Fig. 10).


ALMACENADO


Para un funcionamiento óptimo se recomienda almacene en un lugar fresco lejos de la luz directa del sol.


NOTAS


1. No mezcle con otras resinas químicas.
2. No devuelva el polvo residual ni el líquido a las botellas.
3. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.




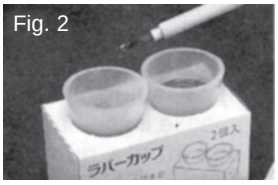


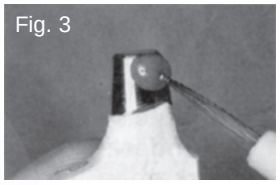


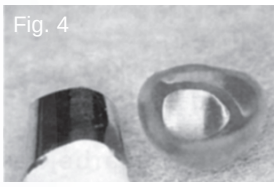


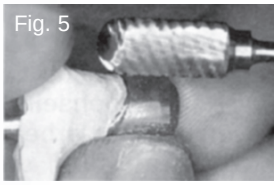


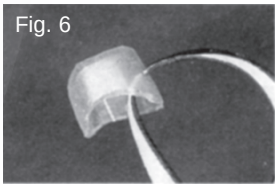

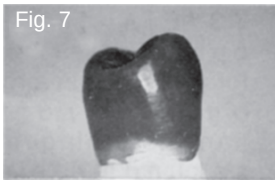

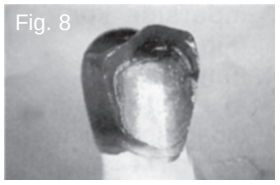

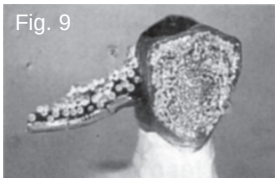

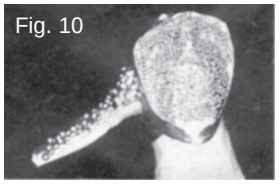

PRESENTACIÓN
1. Polvo: 100g, 1kg
2. Líquido: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 Pkg: 100g polvo, 100g (105mL) líquido con accesorios

PRECAUCIONES
1. El líquido es altamente INFLAMABLE. Evite fuentes de ignición.
2. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si está dañado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un producto de control de la infección de la salud de calidad registrada de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
https://www.gc.dental/europe
o para América:
https://www.gc.dental/america
También se pueden obtener de su proveedor.

Informes de efectos no deseados
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, infórmelos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna:
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

Última revisión: 05/2026

UK CA 0086

CE 2797

℞ Only

MANUFACTURED by
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
www.gc.dental/america

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32-16-74-10-00

GC SOUTH AMERICA
COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA
Rua: Maria Curupaiti, 441 - Sala 5020D Santana, São Paulo, SP, Brasil
CEP: 02452-001 CNPJ: 08.279.999/0001-61 Tel: +55-11-2925-0965
Resp. Tec.: Erick de Lima CRO/SP 100.866

PRINTED IN THE U.S.A.

22 PAP

300022490
Rev. 08/2026

DepoDent
Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura