Carta de formas de dientes

SR Vivodent
SR Orthotyp

Dientes protésicos
probados fabricados con
PMMA de calidad




Making People Smile


SR Vivodent


Pequeño


redon-deado

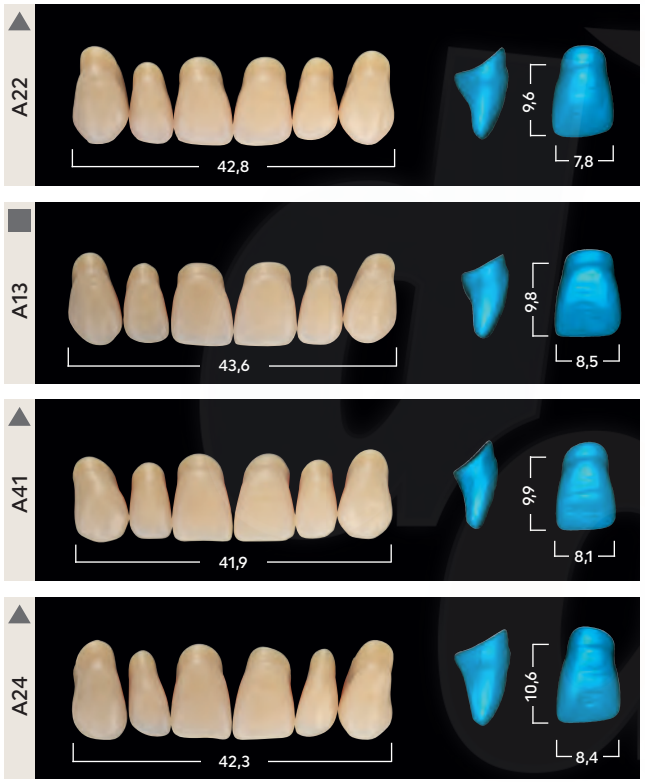


recto

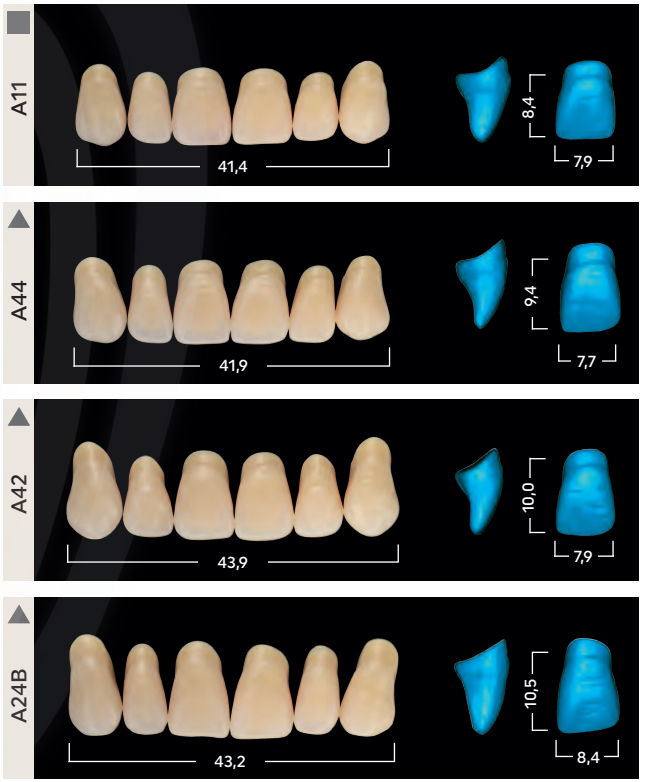

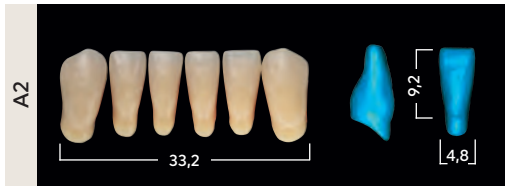

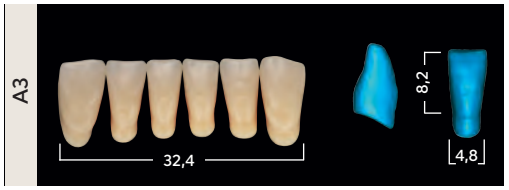


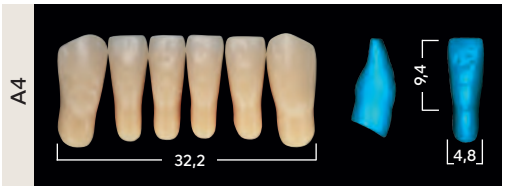


SR Vivodent


Medio


redon-deado

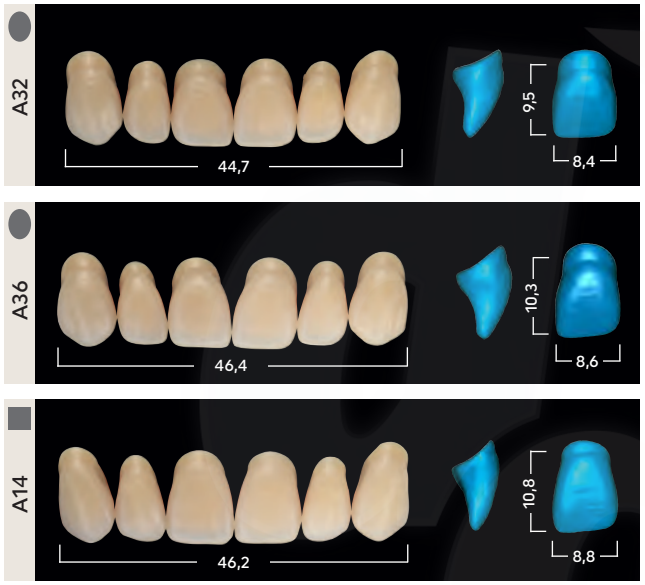

recto

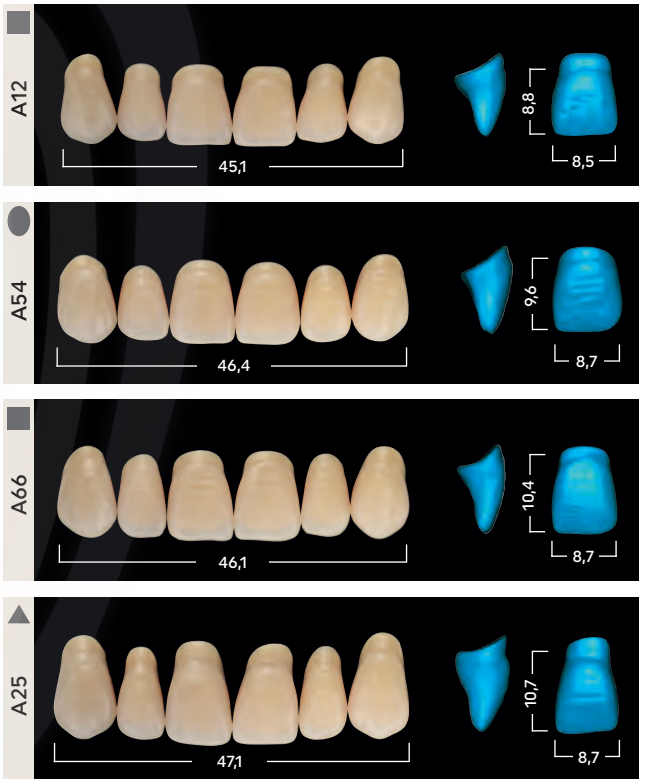

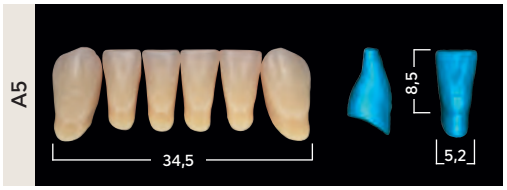

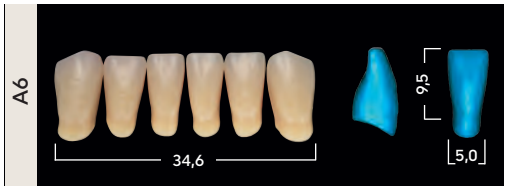

SR Vivodent


Grande


redon-deado





recto




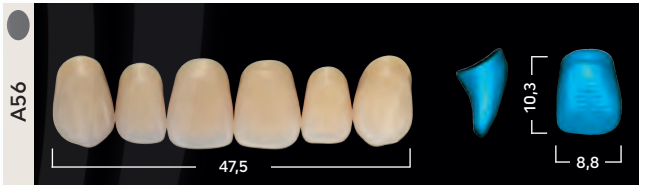


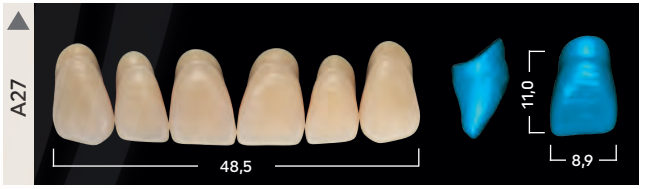

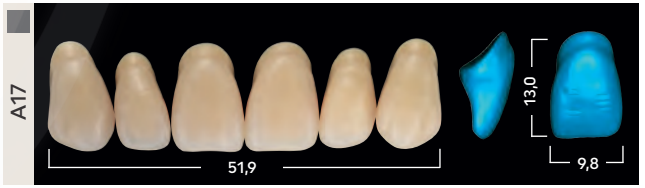

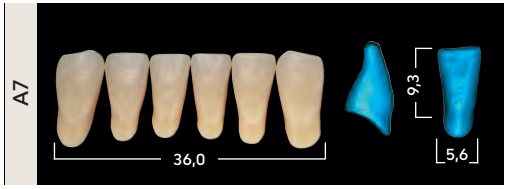

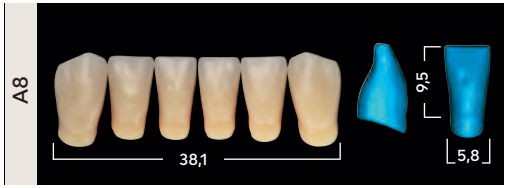


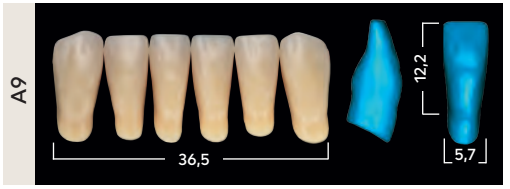


SR Orthotyp


Posteriores



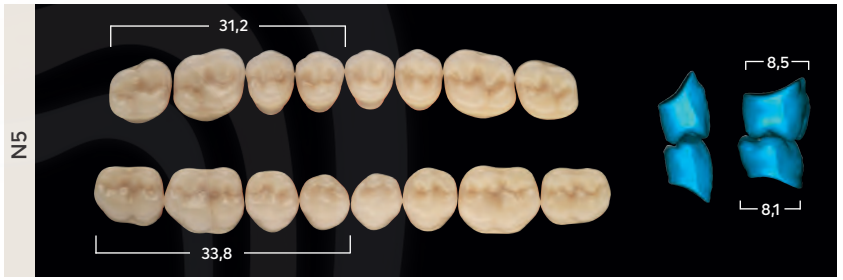



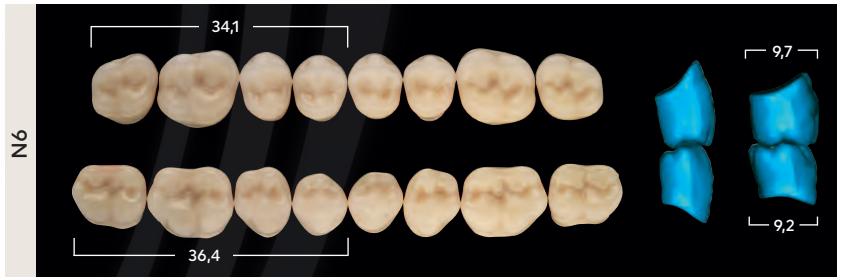


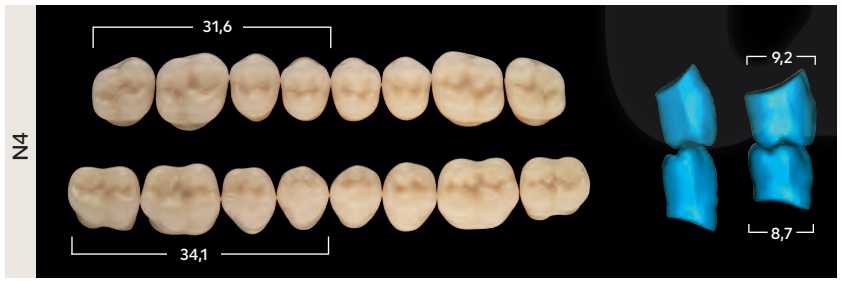

Instrucciones de procesamiento


Selección de dientes anteriores

Si es posible, los dientes anteriores deben seleccionarse directamente con el paciente según las características anatómicas y faciales. Los dientes anteriores se clasifican en moldes dentales triangulares, ovalados y cuadrados. Además, hay formas de dientes suaves y llamativas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cada molde tiene su propio carácter distintivo.

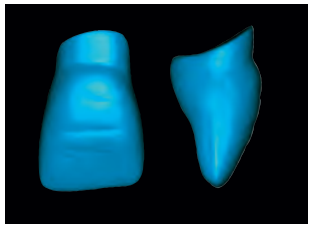


▲

Modelos de piezas triangulares
Este grupo se caracteriza porque las piezas tienen una corona rejuvenecida que se estrecha gradualmente a medida que se aproxima al cuello. La curvatura vertical está ligeramente indicada.

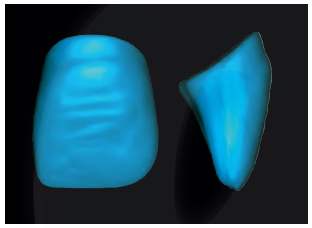

●

Modelos de piezas ovales
Las piezas de esta categoría tienen una curvatura gingivo-incisal pronunciada. La curvatura labial es especialmente pronunciada.

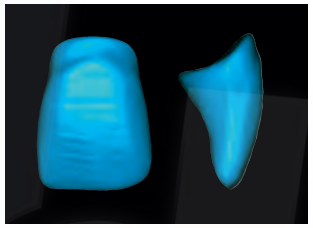

■

Modelos de piezas cuadradas
Con esta forma angular, los incisivos centrales son los dominantes. La curvatura gingivo-incisal es moderada.

Determinación del color

El color del diente se determina con la ayuda de una guía de colores según el sistema de colores A-D o Chromascop de Ivoclar.





La selección de color para el paciente debe realizarse bajo condiciones de luz definidas (temperatura de color de 5.500 K) o con luz de día (preferentemente luz del norte).

Grosor mínimo de la capa

Hay que asegurarse de que se mantienen la estabilidad de los dientes y el efecto de color correcto. Por ello, se recomienda respetar el grosor mínimo de la capa.

- **Dientes anteriores: mín. 2,5 mm**
- **Dientes posteriores: Fosa central mín. 2,0 mm, puntas de las cúspides mín. 2,5 mm, área cervical mín. 2,5 mm**

Importante

Para garantizar que las prótesis removibles siguen siendo funcionales durante mucho tiempo, deberán cumplirse los siguientes requisitos previos:

- Las prótesis dentales deben planificarse y crearse en estrecha colaboración con el odontólogo.
- El dentista y el técnico dental deben garantizar la oclusión y articulación equilibradas.
- Todos los productos dentales deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, los dientes de la prótesis no deben debilitarse por exceso de pulido.
- Con el fin de asegurar una adhesión fiable a los materiales base de la prótesis, los dientes se limpian con vapor, se hacen rugosos y se humedecen con monómero. También se recomienda usar retenciones mecánicas adicionales cuando se complete la prótesis con un polímero autopolimerizable.
- No se recomienda usar barniz abrillantador o espray de limpieza de prótesis.
- Los dientes no deben entrar en contacto con una llama o calor directo.
- Debe evitarse la producción de calor como resultado de demasiada presión durante el pulido.
- Se recomienda usar una mascarilla y equipo de aspiración para la protección contra el polvo de pulido.
- Las prótesis se deben limpiar con agentes de limpieza comerciales. Debe evitarse el contacto con disolventes.
- Si se conoce alguna alergia a algún componente del producto, no deben usarse dientes artificiales.
- Cuando se utilicen materiales de recubrimiento C&B, deben respetarse las correspondientes instrucciones de uso.
- Recomendamos el uso de gafas protectoras para proteger los ojos contra las virutas del pulido.

Tabla de combinaciones

SR Vivodent		SR Orthotyp
Anteriores		Posteriores
superiores	inferiores	superiores/inferiores
A11	A3	N3
A12	A5	N3
A13	A5	N3/N5
A14	A6/A7	N5
A15	A8	N4
A17	A9	N6
A22	A3	N3/N5
A24	A2	N2
A24B	A4/A5	N2
A25	A9	N4
A27	A8	N4
A32	A3/A5	N3/N5
A36	A7	N5
A41	A3/A5	N3/N5
A42	A5	N3/N5
A44	A3	N3/N5
A54	A5	N5
A56	A7/A8	N5
A66	A5/A7	N5
A68	A7	N4/N5

Esta tabla de combinaciones se recomienda como pauta. En caso de condiciones anatómicas particulares, es posible que se produzcan desviaciones.
La gama de productos puede variar dependiendo del país.

Making People Smile

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo
el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura

CE 0123

ISO 22112:2017

Ni las descripciones ni los datos son garantía de ninguna característica.

Fecha de preparación de la información: 2023-06/Rev. 2
754262/EN

ivoclar.com