

OptiDisc[®]

Disco para contorneado y pulido de alto rendimiento



¡Lo que bien empieza debe acabar igual de bien!

Una buena restauración depende tanto de un comienzo correcto como de un gran acabado y pulido. Los discos OptiDisc para acabado y pulido permiten conseguir restauraciones con un resultado final igual del diente natural y ahora son todavía más fáciles de elegir.

FLEXIBLE Y PRECISO

4 COLORES: 4 FASES DE ABRASIÓN

SEGURO

LISTO PARA UTILIZAR Y RENDIMIENTO DURADERO



Together, we're more.TM

FLEXIBLE Y PRECISO

El mandril más corto y la flexibilidad del disco le permiten llegar con facilidad a la zona posterior y otros puntos restringidos. El material transparente le proporciona una gran visibilidad durante el trabajo para aumentar la precisión en la fase de acabado y pulido.



PRECISO



FLEXIBLE



TRANSPARENTE




CORTO



ESTÁNDAR

LISTO PARA UTILIZAR Y RENDIMIENTO DURADERO


OptiDisc está fabricado con poliéster revestido de partículas de óxido de aluminio. Su capa abrasiva no posee ningún revestimiento adhesivo adicional, de forma que en cuanto coloca el disco en el mandril puede comenzar a trabajar.

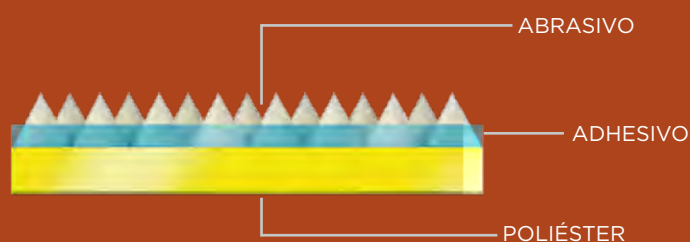

EXTRAGRUESO



GRUESO/MEDIO

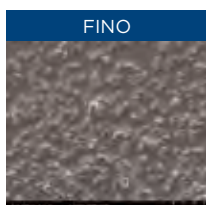

FINO




EXTRAFINO

OptiDisc®



GRUESO

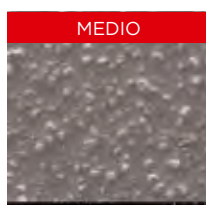

MEDIO



FINO



SUPER FINO

Sof-Lex™

Las imágenes SEM muestran la comparación del revestimiento abrasivo de los materiales de la competencia.

Imágenes SEM cortesía del Dr. Jean-Pierre Salomon, Francia.
Sof-Lex es una marca registrada de 3M ESPE.

SEGURO

El lado activo de OptiDisc se identifica fácilmente y el mandril patentado se bloquea por debajo de la superficie del disco, protegiendo la restauración de marcas y rasguños. Asimismo, garantiza una transmisión óptima del par de fuerza, de forma que el disco no se deslice ni sea sensible a las rpm, proporcionándole una manipulación mejor y más segura.




LADO ACTIVO



LADO INACTIVO



DISCO DE LA
COMPETENCIA

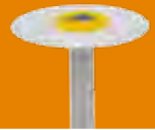

OptiDisc

4 COLORES 4 FASES DE ABRASIÓN

El sistema OptiDisc permite elegir entre cuatro discos con nivel de grano distinto para el contorneado, el acabado y el pulido de alto brillo. Es adecuado para composite, ionómeros de vidrio, amalgamas, metales preciosos y semipreciosos. Los discos también están disponibles con tres tamaños de diámetro en función de sus necesidades: 9,6 mm, 12,6 mm y 15,9 mm.



15.9mm



12.6mm



9.6mm

Los discos codificados por colores le ayudan a identificar el tamaño de grano que desea de forma sencilla y clara.



Extragrueso
CONTORNEADO



Grueso/Medio
ACABADO



Fino
PULIDO



Extrafino
**PULIDO
CON BRILLO
ELEVADO**

UN DISCO PARA TODAS SUS NECESIDADES DE ACABADO Y PULIDO

Tipo de disco	indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso	DESBASTADO Y CONTORNEADO • Para ajustar la forma geométrica primaria.			
Grueso/Medio	ACABADO • Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.			
Fino	PULIDO • Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino	PULIDO CON BRILLO ELEVADO • Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm.			

Kit surtido general de OptiDisc

CONTIENE: Surtido x 120 OptiDisc de ø 9,6 mm [30 extragruesos; 30 gruesos; 30 finos, 30 extrafinos]; 120 OptiDisc surtido de ø 12,6 mm [30 extragruesos; 30 gruesos; 30 finos, 30 extrafinos]; 3 mandriles estándar; 2 mandriles cortos; 1 OptiShine.

Referencia	Descripción
4200	Kit surtido general de OptiDisc – 9,6 mm, 12,6 mm (240 uds.)

Kit surtido de OptiDisc

CONTIENE: Surtido x 80 OptiDisc de ø 15,9 mm [20 extragruesos; 20 gruesos; 20 finos, 20 extrafinos];

Referencia	Descripción
4190	Kit surtido de OptiDisc – 15,9 mm (80 uds.)

Kit mini de OptiDisc

CONTIENE: Surtido x 120 OptiDisc de ø 12,6 mm [30 extragruesos; 30 gruesos; 30 finos, 30 extrafinos]; 1 mandriles estándar; 1 mandriles cortos; 1 OptiShine.

Referencia	Descripción
4188	Kit mini de OptiDisc – 12,6 mm (120 uds.)

Repuestos de OptiDisc

Referencia	Descripción
4197	80 OptiDisc – 9,6 mm – Extragrueso
4181	100 OptiDisc – 9,6 mm – Grueso/medio
4182	100 OptiDisc – 9,6 mm – Fino
4183	100 OptiDisc – 12,6 mm – Extrafino
4198	80 OptiDisc – 12,6 mm – Extragrueso
4184	100 OptiDisc – 12,6 mm – Grueso/medio
4185	100 OptiDisc – 12,6 mm – Fino
4186	100 OptiDisc – 12,6 mm – Extrafino
4199	80 OptiDisc – 15,9 mm – Extragrueso
4191	100 OptiDisc – 15,9 mm – Grueso/medio
4192	100 OptiDisc – 15,9 mm – Fino
4193	100 OptiDisc – 15,9 mm – Extrafino
195	5 Mandriles estándar de OptiDisc
196	5 Mandriles corto de OptiDisc

OptiDisc™ | ¡El disco de modelado y pulido de alto rendimiento es ahora aún más fácil de elegir!




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

OptiDisc™

- El material translúcido ofrece una mayor visibilidad de la zona de trabajo, para un acabado aún más preciso.
- Fabricado en poliéster recubierto con partículas de óxido de aluminio.
- Recubrimiento de mandril patentado para evitar arañazos y coloración del diente.
- Rendimiento muy duradero.
- 4 tamaños de grano para el modelado, acabado, pulido y pulido de alto brillo.
- El sistema codificado por colores le permite identificar fácilmente el nivel del grano adecuado según las necesidades del procedimiento.


OptiDisc™ Mandriles

- Recubrimiento de mandril patentado para evitar arañazos y coloración del diente.
- Transmisión óptima del par al disco, sin ningún deslizamiento.
- Los mandriles pueden esterilizarse en autoclave.
- Tamaños y longitudes de los mandriles.
- El mandril más corto facilita un fácil acceso a la zona posterior y otras zonas restringidas.

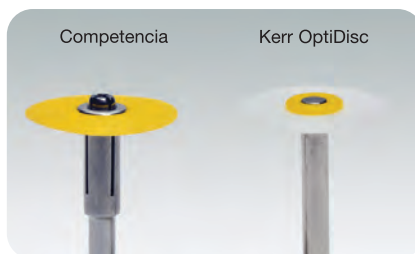

Codificación por colores fácil de reconocer

Las etapas codificadas por colores de abrasión permiten determinar con facilidad el tamaño de grano y el paso clínico.

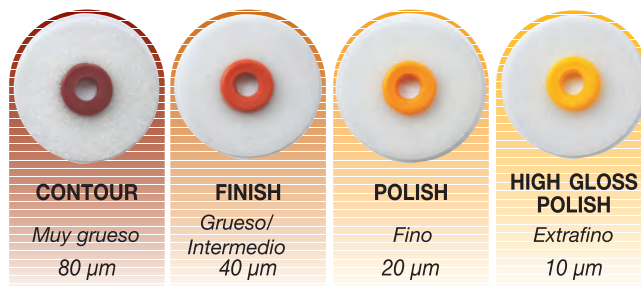

Lado activo



Lado no activo



Kerr Corporation
1717 W. Collins Ave.
Orange, CA 92867 USA
1-800-KERR-123
kerrdental.com

Kerr

Información para pedidos

OptiDisc

Kits surtidos

4200 OptiDisc Kit surtido 9.6mm, 12.6mm (240 piezas)

Contiene:

Ø 9.6mm: 30/Muy grueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino
Ø 12.6mm: 30/Muy grueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino
3 mandriles estándar, 2 mandriles cortos, 1 OptiShine

4190 OptiDisc Kit surtido 15.9mm (80 piezas)

Contiene:

Ø 15.9mm: 20/Muy grueso, 20/Grueso, 20/Fino, 20/Extrafino

4188 OptiDisc Kit mini 12.6mm (120 piezas)

Contiene:

Ø 12.6mm: 30/Muy grueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino
1 mandril estándar, 1 mandril corto, 1 OptiShine

195 OptiDisc Mandril corto (5 piezas)

196 OptiDisc Mandril estándar (5 piezas)

Paquetes de relleno

Ø 9.6mm

4197 OptiDisc Muy grueso 9.6mm (80 piezas)

4181 OptiDisc Grueso/Intermedio 9.6mm (100 piezas)

4182 OptiDisc Fino 9.6mm (100 piezas)

4183 OptiDisc Extrafino 9.6mm (100 piezas)

Ø 12.6mm

4198 OptiDisc Muy grueso 12.6mm (80 piezas)

4184 OptiDisc Grueso/Intermedio 12.6mm (100 piezas)

4185 OptiDisc Fino 12.6mm (100 piezas)

4186 OptiDisc Extrafino 12.6mm (100 piezas)

Ø 15.9mm

4199 OptiDisc Muy grueso 15.9mm (80 piezas)

4191 OptiDisc Grueso/Intermedio 15.9mm (100 piezas)

4192 OptiDisc Fino 15.9mm (100 piezas)

4193 OptiDisc Extrafino 15.9mm (100 piezas)

Otros productos relacionados:

OptiStrip™

Tira para el acabado y pulido



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se utiliza para el acabado y el pulido de las superficies interdentes.
- Ideal para el pulido de restauraciones directas, incluyendo composites, ionómeros de vidrio, amalgamas y metales preciosos y semipreciosos.
- Las partículas abrasivas tienen una forma optimizada para reducir el desgaste y mantener el filo para una eficiencia duradera.
- Ofrece un mayor valor al proporcionar un procedimiento más rápido de acabado y pulido, en tan solo 2 pasos.

Información para pedidos

1990 OptiStrip Kit surtido

Contiene: 4 x 50 OptiStrip de cada tipo

Paquetes de relleno de 100

1991 OptiStrip Tira para acabado, 2 mm

1992 OptiStrip Tira para pulido, 2 mm

1993 OptiStrip Tira para acabado, 4 mm

1994 OptiStrip Tira para pulido, 4 mm

Opti1Step™ Polisher

Pulidor de alto brillo de un paso para composite



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de uso de varios usos.
- Indicado para composite.
- Aumenta el brillo de la superficie.
- Reduce la rugosidad de la superficie y la retención de bacterias.
- Rentable en comparación con los procedimientos tradicionales.
- Formas diferentes.
- Puede esterilizarse en autoclave a 134 °C, reutilizable
- Técnica rápida y sencilla: no se necesita ninguna pasta.
- Mandril con baño de oro y matriz única para una mayor durabilidad.

Información para pedidos

8000 Opti1Step Kit surtido

Contiene: 12 pulidores Opti1Step de composite: 4 llamas, 4 copas, 4 discos

8004 Opti1Step Kit mini surtido

Contiene: 6 pulidores Opti1Step de composite: 2 llamas, 2 copas, 2 discos

8001 Opti1Step 

Contiene: 12 pulidores de composite

8002 Opti1Step 

Contiene: 12 pulidores de composite

8003 Opti1Step 

Contiene: 12 pulidores de composite

OptiShine™ Occlubrush™

Cepillos de pulido



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

OptiShine™

- El primer cepillo de pulido con forma cóncava.
- Puede esterilizarse varias unidades en autoclave, a 134 °C, durante al menos 3 minutos, sin ningún efecto sobre la eficacia del pulido.
- Aumenta el brillo de la superficie.
- Reduce la rugosidad y la retención de bacterias.

Occlubrush™

- Pulido no destructivo de superficies oclusivas y cóncavas.
- Sin pasta.
- Más rápido y eficiente que los sistemas con pasta de pulido.

Información para pedidos

	paquete de 3	de 10
OptiShine™	2513	2514

Occlubrush™

2520 Occlubrush Kit surtido

Contiene: 5 x copa normal Occlubrush,
5 x copa pequeña Occlubrush, 5 x punto Occlubrush

	paquete de 3	de 10
Occlubrush™ Copa normal	2503	2510
Occlubrush™ Copa pequeña	2504	2511
Occlubrush™ Punta	2505	2512