



DECANTADORAS

Ref. 080085-89



Decantadoras de polipropileno con bolsa recogedora




Fabricadas en polipropileno resistente.

El diseño está específicamente estudiado para conseguir una rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

Ref. 080085 (19 L)

Especificaciones:

Alto 465 mm • Ancho 400 mm • Fondo 400 mm

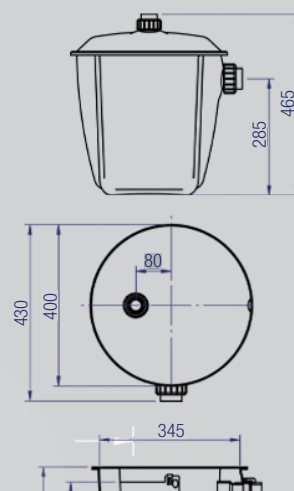

Introducir la boca de entrada en la cámara más alta.


Para la limpieza soltar el racor del desagüe, colocar el tapón roscado, retirar el agua estancada y extraer el separador.

Extraer el adaptador de la salida de desagüe.

Atar la bolsa por debajo de la abertura del desagüe y eliminar los desechos.

Decantadora 18 L

Ref. 080086

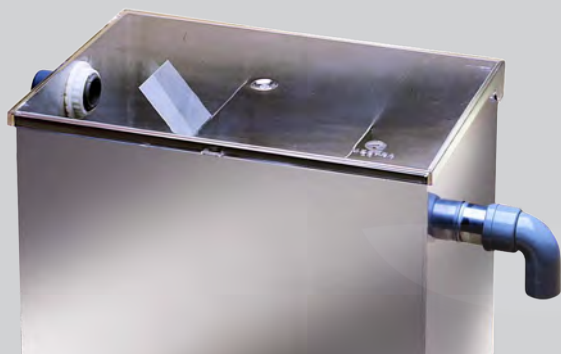

- ✓ Construida en acero inoxidable.
- ✓ Con tapa de plástico para evitar olores.

Especificaciones:

Alto 290 mm • Ancho 450 mm • Fondo 230 mm

Peso 6,5 kg • Capacidad 18 L

Bolsas de 20 unidades

Ref. 080085-02



CONTACTO

ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES

Castellón
Tarragona

Distribución en todo
el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura