DepoDent

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

ACRYLUX

DENTS ARTIFICIELLES EN RÉSINE
DIENTES ARTIFICIALES EN RESINA





ACRYLUX

AI
Acry Lux

FACILE À TRAVAILLER
FÁCIL DE TRABAJAR

RÉSISTANCE PHYSIQUE ET CHIMIQUE
RESISTENCIA FÍSICO-QUÍMICA

GRÂCE À L'UTILISATION D'UNE RÉSINE À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE
DEBIDO AL USO DE UNA RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR




MADE IN ITALY

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE
DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA

3 COUCHES
CAPAS

DENTS EN RÉSINE ACRYLIQUE (PMMA)
DIENTES DE RESINA ACRÍLICA (PMMA)

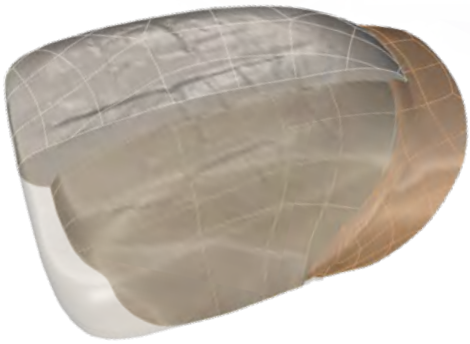

La dent Acry Lux offre un effet esthétique élevé grâce à ses 3 couches de résine acrylique et à la coupe en couronne des bords incisifs. Le large assortiment de formes et de teintes lui permet de s'adapter à toutes les exigences prothétiques.




Elevado efecto estético gracias a las 3 capas de resina acrílica y gracias al corte en corona de los bordes incisales. El amplio surtido de formas y colores la hacen Acry Lux adaptable a cualquier necesidad protésica.

Détermination de la forme / *Determinación de la forma*

Selon Williams :
Forme de la dent choisie en fonction de la forme du visage.

Según Williams:
La forma de los dientes eligida en función de la forma del rostro.

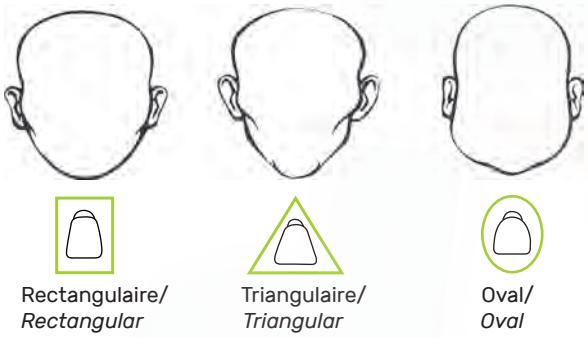

Rectangulaire/ *Rectangular* | Triangulaire/ *Triangular* | Oval/ *Oval*

Selon Gerber:
La forme et la position des membres antérieurs sont déterminées par la ligne de base de la truffe.


Según Gerber:
La forma y la posición de los anteriores están determinadas por la línea basal de la nariz.



Selon la forme des crêtes alvéolaires:
Si aucune référence n'est fournie selon les classifications précédentes, la forme de la crête alvéolaire supérieure peut renseigner sur la forme des dents à utiliser.

Según la forma de las crestas alveolares:
Si no se obtienen referencias de las clasificaciones anteriores, la forma de la cresta alveolar superior puede proporcionar información sobre la forma de los dientes que hay que utilizar.



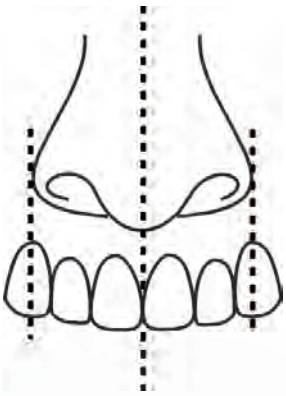


Choix des groupes d'incisives
Détermination de la largeur du groupe antérieur selon de Lee

Elección de los grupos incisivos
Determinación de la anchura del grupo anterior según el estudio de Lee.

La ligne verticale imaginaire qui touche les marges des des ailes nasales croise l'axe des canines.

La línea vertical imaginaria que toca los márgenes de las aletas nasales atraviesa el eje de los caninos.

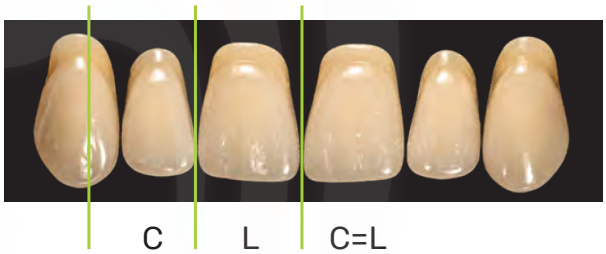

La largeur centrale est donnée par la largeur des canines latérales ajoutée à la partie mésiale de la canine.


La anchura central está dada por la anchura del lateral sumada a la parte mesial del canino.



Molaires géométriques et anatomiques
Les geometriques sont des dents construites selon les recherches de Starck pour la construction de la prothèse équilibrée bilatérale. Angle de cuspide de 20°. Les anatomiques sont des dents caractérisées par leur anatomie accentuée afin d'assurer la modifiabilité de l'utilisation dans toutes les techniques de montage. Angle de la cuspide : 25°-33°.

Molares geométricos y anatómicos
Los dientes geométricos se han construido según los estudios de Strack para la construcción de la prótesis balanceada bilateral. Ángulo de cúspide de 20°.
Los dientes anatómicos son molares caracterizados por anatomía acentuada para garantizar modificabilidad para el empleo en todas las técnicas de montaje.
Ángulo de las cúspides: 25°-33°.

RÉSINES À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE H.M.W. - *PMMA RÉTICULÉ*
Resinas de alto peso molecular H.M.W. (PMMA CROSS-LINKED)

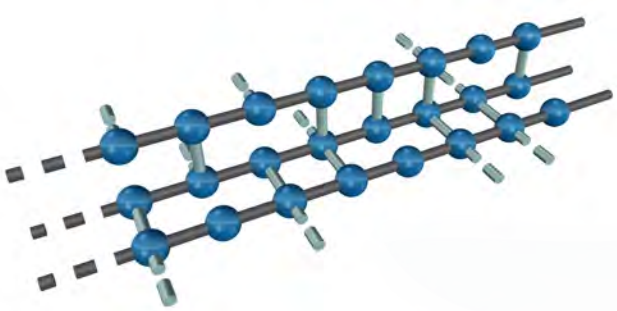

Liaison réticulée entre chaînes moléculaires
Enlace cross-linked entre cadenas moleculares

Liaison polymérique entre monomères
Enlace polimérico entre monómeros

Unités monomères
Unidad de monómero


L'utilisation de polymères modifiés à haut poids moléculaire combinés à des liants moléculaires spéciaux (réticulation), confère:

Grande dureté
Excellente résistance à l'abrasion
Stabilité de la couleur
Excellente résistance à l'adhésion de la plaque

El empleo de polímeros de alto peso molecular modificados, combinados con aglomerantes moleculares específicos (Cross Linking) proporciona:

Gran dureza
Excelente resistencia a la abrasión
Estabilidad del color
Excelente resistencia a la adherencia de placa


Molécules de PMMA / *Moléculas de PMMA*

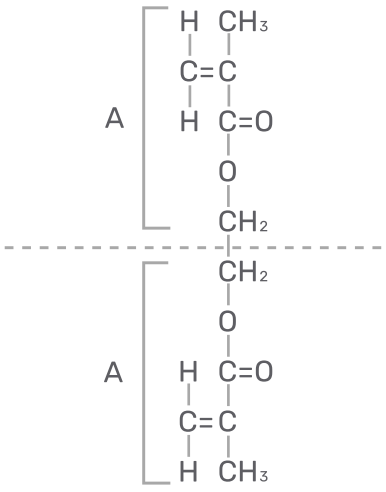

Couleurs / *Colores*

Les dents artificielles Ruthinium sont disponibles dans une large gamme de couleurs. L'utilisation de spectrophotomètres dans la phase de contrôle garantit la cohérence et la fidélité.

Los dientes artificiales Ruthinium existen en una amplia gama de colores. El empleo de espectrofotómetros en la fase de control, garantiza su constancia y fidelidad.

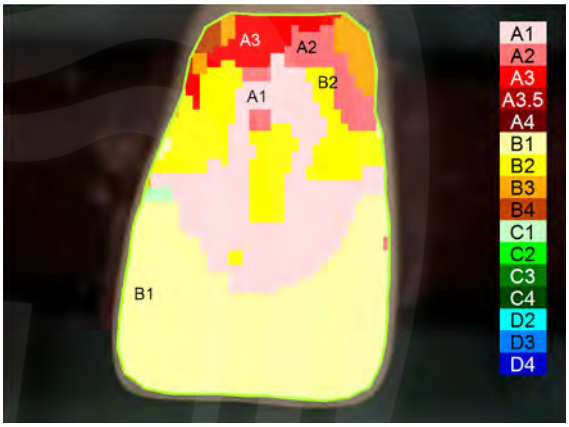

Fluorescence / *Fluorescencia*

La fluorescence est une forme particulière de luminescence présente dans certaines substances. Cette caractéristique est présente dans les dents naturelles qui, lorsqu'elles sont touchées par un rayonnement ultraviolet proche de la lumière, émettent une lumière bleu-blanc. Dans toutes les dents Ruthinium, cette caractéristique est présente, pour donner un effet encore plus naturel.

La fluorescencia es una forma especial de luminiscencia que existe en algunas sustancias. Esta característica existe en los dientes naturales que, cuando se someten a radiaciones ultravioletas próximas a lo visible, emiten una luz de color blanco-azul. En todos los dientes Ruthinium dicha característica existe, para proporcionar un efecto todavía más natural.



CODE PRODUIT/ *CÓDIGO PRODUCTO*

0090001	ACRY LUX 6 UPPER
0090002	ACRY LUX 6 LOWER
0090003	ACRY LUX 8 UPPER
0090004	ACRY LUX 8 LOWER
0100001	ACRY LUX SET 28
0110001	SHADE GUIDE ACRY LUX
0110002	LIVE MOULD CHART ACRY LUX
0090009	ACRY LUX V. 6 UPPER
0090010	ACRY LUX V. 6 LOWER
0090011	ACRY LUX V. 8 UPPER
0090012	ACRY LUX V. 8 LOWER
0090013	ACRY LUX V. SET 28
0110003	SHADE GUIDE ACRY LUX V.
0110004	LIVE MOULD CHART ACRY LUX V.

MD CE
CLASS IIA 0476

TEINTIER / *ESCALA DE COLORES*

	ACRY*LUX*	ACRY*LUX V*
BLEACH		BL - B0
WHITE	1A	A1 - B1
WHITE PINK	2A	A2
WHITE LIGHT YELLOW	2B - 1C	A3 - D4
PINK YELLOW	1D	A3,5
YELLOW	3A - 5B - 2E - 3E	B3 - B4
YELLOW ORANGE	2C - 1E	
YELLOW GREY		C2
BROWN	4D	A4
WHITE GREY	6B - 6C - 6D	C1 - B2 - D2
GREY	4A - 4B- 3C - 4C	D3 - C3 - C4

INCISIVES SUPÉRIEURS / *INCISIVOS SUPERIORES*


Rectangulaire/ *Rectangular* — Triangulaire/ *Triangular* — Oval/ *Oval*









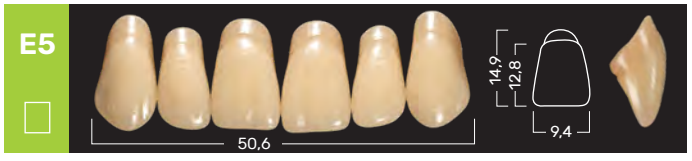

















INCISIVES INFÉRIEURS / *INCISIVOS INFERIORES*














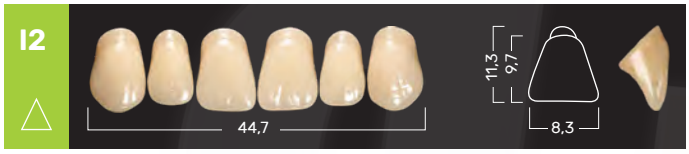

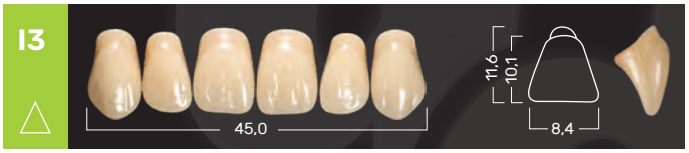

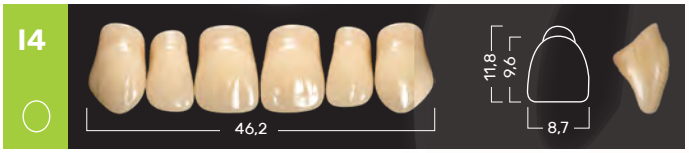


































MOLAIRES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES / *MOLARES SUPERIOR E INFERIOR*


G Géométrique / Geométrico

A Anatomique / Anatómico


M1 G

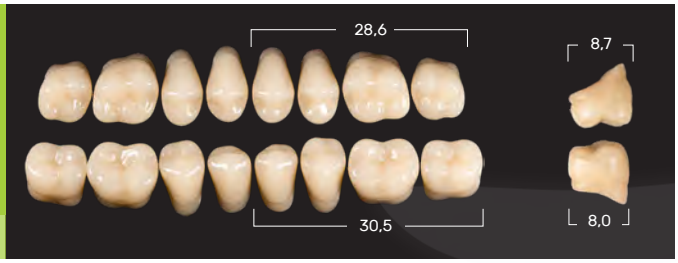


M2 G

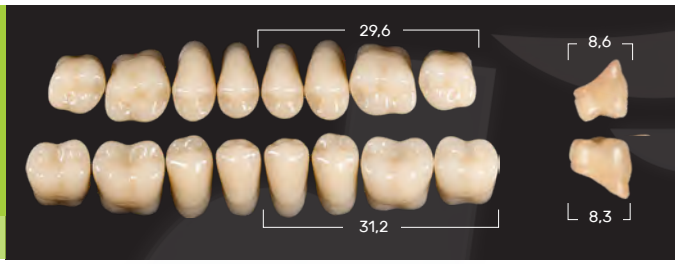


M3 G

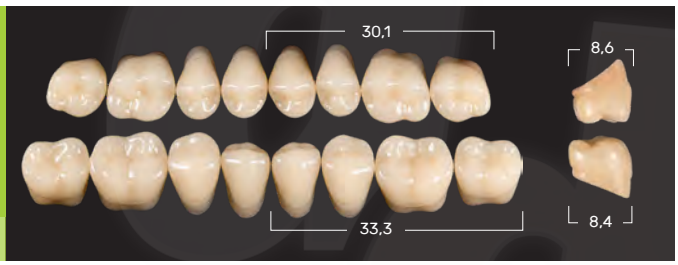

M4 G

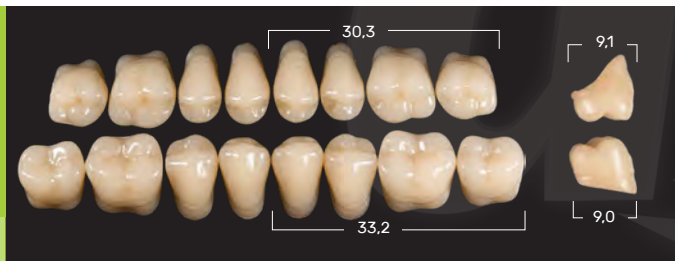

M5 G

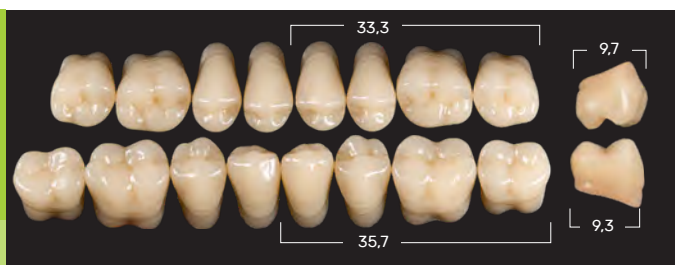


N1 A




TABLE D'ARTICULATION* / *TABLA DE ARTICULACIÓN**

E1	K5	K3		M2	
E2	K6	K5		M4	N3
E3	K6			M4	N3
E4	K9			M5	
E5	K10			M5	
F1	K1			M1	N1
F2	K2			M2	
F3	K5	K2		M3	N2
F4	K10	K9		M5	
G1	K2	K1		M1	N1
G2	K6	K7		M2	
G3	K6	K4		M4	N3
G4	K8	K11		M5	
H1	K7	K1		M1	N1
H2	K5	K2		M2	
H3	K3	K1		M3	N2
H4	K4	K3	K5	M4	N3
I1	K7	K1		M1	N1
I2	K5			M3	N2
I3	K11			M4	N3
I4	K8	K12		M5	
L1	K8			M4	N3
L2	K11			M4	N3
L3	K11			M4	N3
L4	K12			M5	

N2 A

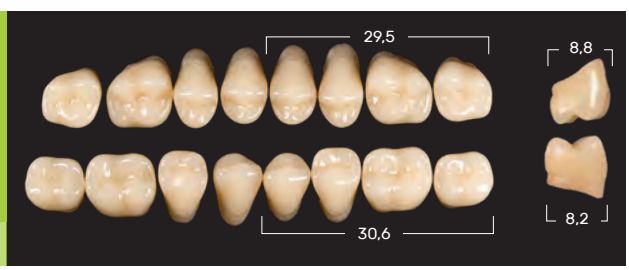

N3 A

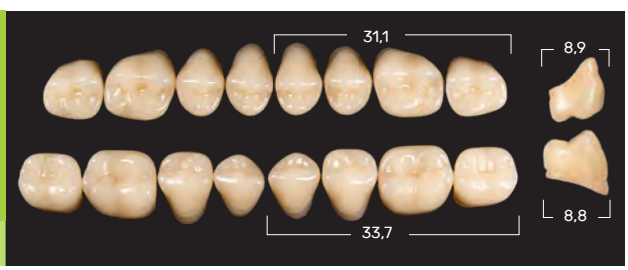

*Les combinaisons sont indicatives. Le type d'assemblage et le cas clinique peuvent nécessiter des combinaisons différentes.
**Las combinaciones son indicativas. El tipo de montaje y el caso clínico pueden requerir combinaciones diferentes.*