DepoDent

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

ACRYROCK V

DENTS ARTIFICIELLES EN RÉSINE
DIENTES ARTIFICIALES EN RESINA



ACRY ROCK V

Ar
Acry Rock

DURETÉ NATURELLE
DUREZA NATURAL

HAUTE QUALITÉ
ALTA CALIDAD

RÉSISTANT À L'ABRASION
ET À L'ADHÉRENCE DE LA PLAQUE

RESISTENTE A LA ABRASIÓN
Y A LA ADHERENCIA DE LA PLACA

2 DENTS EN RÉSINE ACRYLIQUE (PMMA)
DIENTES DE RESINA ACRÍLICA (PMMA)

COUCHES
CAPAS



DURETÉ
DUREZA

EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE ET PHYSIQUE GRÂCE À L'UTILISATION DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y FÍSICA RESISTENCIA FÍSICA GRACIAS AL USO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD

NATURALITÉ
NATURALEZA


LARGE ASSORTIMENT DE FORMES ET DE COULEURS
GRAN VARIEDAD DE FORMAS Y COLORES



Liaison réticulée entre chaînes moléculaires
Enlace cross-linked entre cadenas moleculares

Liaison polymérique entre monomères
Enlace polimérico entre monómeros

Unités monomères
Unidad de monómero

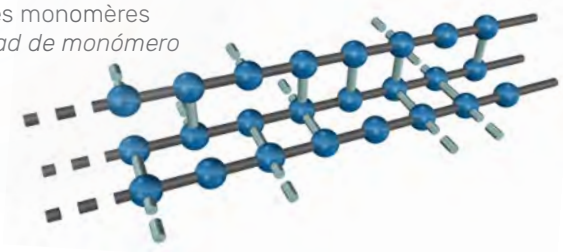

Le large assortiment de formes et de teintes lui permet de s'adapter à tous les nécessités prothétiques. Gamme de 19 teintes, 32 formes d'incisives supérieures, 19 incisives inférieures, 22 molaires.

El amplio surtido de formas y colores hace que se adapte a cualquier necesidad protésica. Gama de 19 colores, 32 formas de incisivos superiores, 19 incisivos inferiores, 22 molares.

L'utilisation de polymères modifiés à haut poids moléculaire combinés à des liants moléculaires spéciaux (réticulation), confère:

Grande dureté
Excellente résistance à l'abrasion
Stabilité de la couleur
Excellente résistance à l'adhésion de la plaque


El empleo de polímeros de alto peso molecular modificados, combinados con aglomerantes moleculares específicos (Cross Linking) proporciona:

Gran dureza
Excelente resistencia a la abrasión
Estabilidad del color
Excelente resistencia a la adherencia de placa

Détermination de la forme / *Determinación de la forma*

Selon Williams :
Forme de la dent choisie en fonction de la forme du visage.

Según Williams:
La forma de los dientes eligida en función de la forma del rostro.

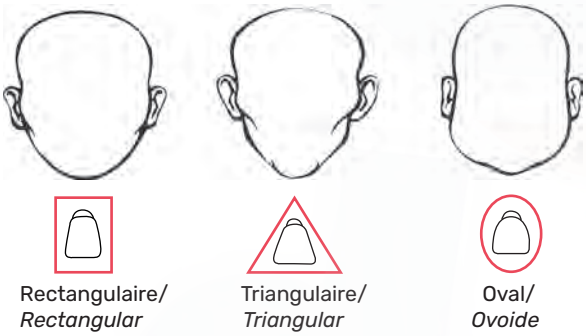

Rectangulaire/ *Rectangular* | Triangulaire/ *Triangular* | Oval/ *Ovoide*

Selon Gerber:
La forme et la position des membres antérieurs sont déterminées par la ligne de base de la truffe.


Según Gerber:
La forma y la posición de los anteriores están determinadas por la línea basal de la nariz.



Selon la forme des crêtes alvéolaires:
Si aucune référence n'est fournie selon les classifications précédentes, la forme de la crête alvéolaire supérieure peut renseigner sur la forme des dents à utiliser.

Según la forma de las crestas alveolares:
Si no se obtienen referencias de las clasificaciones anteriores, la forma de la cresta alveolar superior puede proporcionar información sobre la forma de los dientes que hay que utilizar.



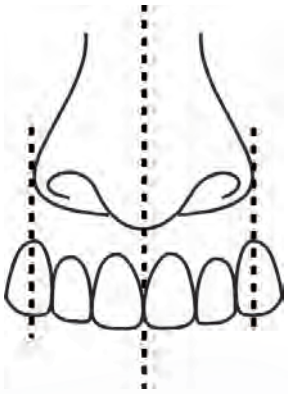

Choix des groupes d'incisives
Détermination de la largeur du groupe antérieur selon de Lee

Elección de los grupos incisivos
Determinación de la anchura del grupo anterior según el estudio de Lee.

La ligne verticale imaginaire qui touche les marges des des ailes nasales croise l'axe des canines.

La línea vertical imaginaria que toca los márgenes de las aletas nasales atraviesa el eje de los caninos.



La largeur centrale est donnée par la largeur des canines latérales ajoutée à la partie mésiale de la canine.

La anchura central está dada por la anchura del lateral sumada a la parte mesial del canino.

Fluorescence / *Fluorescencia*

La fluorescence est une forme particulière de luminescence présente dans certaines substances. Cette caractéristique est présente dans les dents naturelles qui, lorsqu'elles sont touchées par un rayonnement ultraviolet proche de la lumière, émettent une lumière bleu-blanc. Dans toutes les dents Ruthinium, cette caractéristique est présente, pour donner un effet encore plus naturel.

La fluorescencia es una forma especial de luminiscencia que existe en algunas sustancias. Esta característica existe en los dientes naturales que, cuando se someten a radiaciones ultravioletas próximas a lo visible, emiten una luz de color blanco-azul. En todos los dientes Ruthinium dicha característica existe, para proporcionar un efecto todavía más natural.



CODE PRODUIT/ *CÓDIGO PRODUCTO*

0010013	ACRY ROCK V 6 UPPER
0010014	ACRY ROCK V 6 LOWER
0010015	ACRY ROCK V 8 UPPER
0010016	ACRY ROCK V 8 LOWER
0020003	ACRY ROCK V SET 28
0030002	SHADE GUIDE ACRY ROCK V
0020004	LIVE MOULD CHART ACRY ROCK V

TEINTIER / *ESCALA DE COLORES*


ACRYROCK V

BLEACH	BL
WHITE	A1 - B1
WHITE PINK	A2
WHITE LIGHT YELLOW	A3 - D4 - E1
PINK YELLOW	A3,5
YELLOW	B3 - B4 - F1
YELLOW ORANGE	F2
YELLOW GREY	C2
BROWN	A4
WHITE GREY	C1 - B2 - D2
GREY	D3 - C3 - C4


INCISIVES SUPÉRIEURS / *INCISIVOS SUPERIORES*




Rectangulaire/ *Rectangular* — Triangulaire/ *Triangular* — Oval/ *Ovoide*

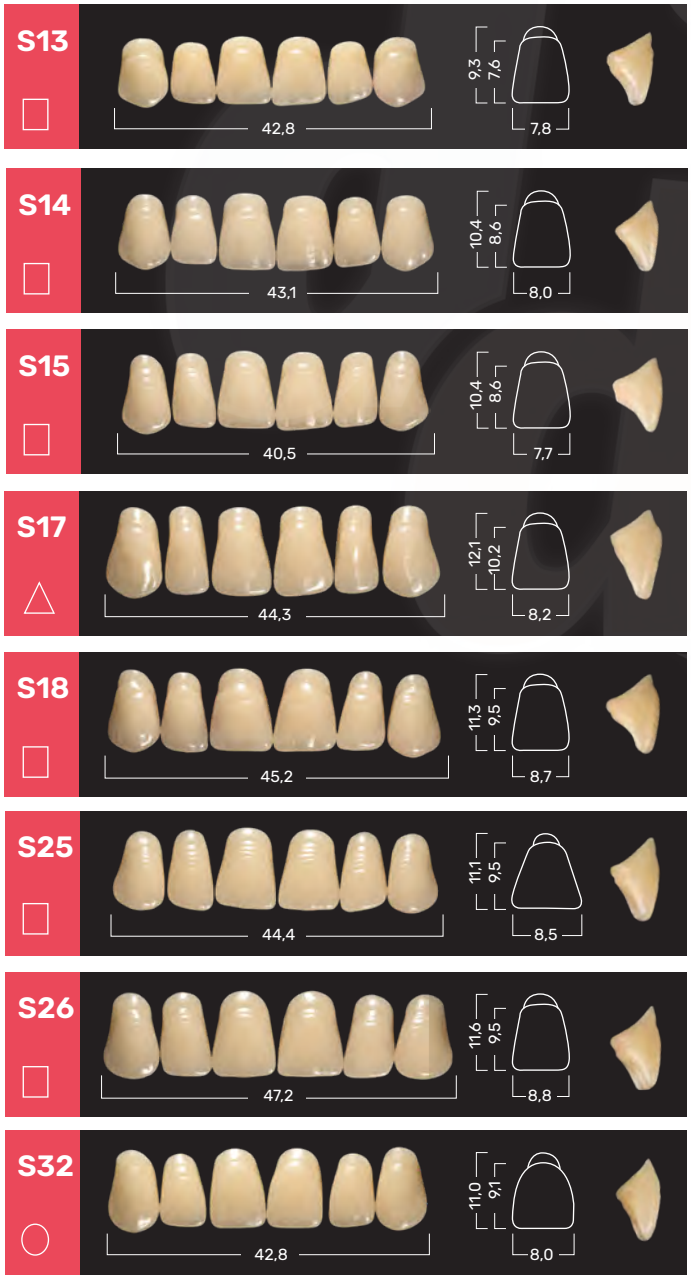



MD CE
CLASS IIA 0476

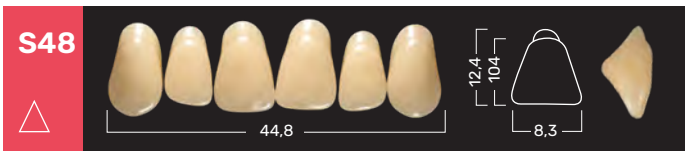




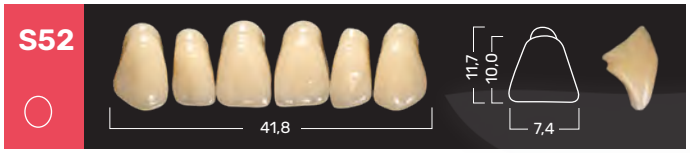

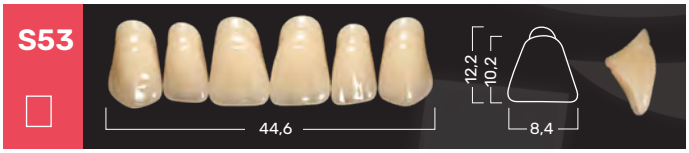

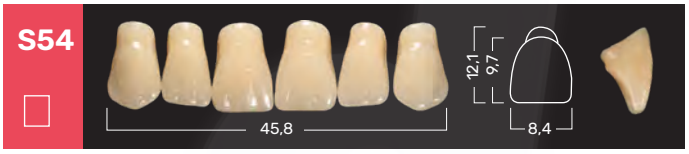



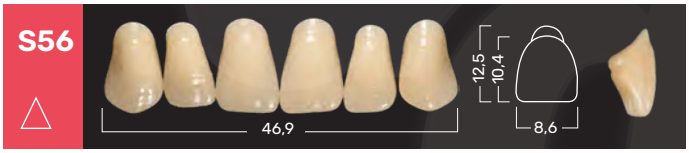



















INCISIVES INFÉRIEURS / *INCISIVOS INFERIORES*















TABLE D'ARTICULATION* /
*TABLA DE ARTICULACIÓN**



S13	I13		D35	
S14	I13		D35	
S15	I38		D37	D43
S17	I41		D39	D44
S18	I18		D39	D44
S25	I18		D39	
S26	I46		D39	D45
S32	I41	I42	D39	D44
S33	I46		D45	
S37	I37		D36	D42
S38	I38		D37	D43
S39	I51		D35	
S40	I40		D36	D42
S41	I41		D39	D44
S42	I42		D39	D44
S47	I18	I53	D39	
S48	I46		D45	
S51	I51		D35	
S52	I52		D36	D42
S53	I53		D39	D44
S54	I53		D39	D44
S55	I66		D45	D46
S56	I46		D45	
S60	I60		D33	
S61	I61		D36	D42
S62	I61		D36	D42
S63	I63		D39	D44
S64	I64		D41	
S65	I65		D41	
S66	I66		D44	
S67	I67		D45	
S68	I68		D46	

*Les combinaisons sont indicatives. Le type d'assemblage et le cas clinique peuvent nécessiter des combinaisons différentes.

**Las combinaciones son indicativas. El tipo de montaje y el caso clínico pueden requerir combinaciones diferentes.*

MOLAIRES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES / *DIADORES SUPERIOR E INFERIOR*



G Geometrico / *Geometric*

A Anatomico / *Anatomic*


Molaires géométriques et anatomiques

Les geometriques sont des dents construites selon les recherches de Starck pour la construction de la prothèse équilibrée bilatérale. Angle de cuspide de 20°. Les anatomiques sont des dents caractérisées par leur anatomie accentuée afin d'assurer la modifiabilité del'utilisation dans toutes les techniques de montage. Angle de la cuspide : 25°-33°.


Molares geométricos y anatómicos

Los dientes geométricos se construyen según los estudios de Strack para la construcción de la prótesis balanceada bilateral. Ángulo de cúspide de 20°. Los dientes anatómicos son molares caracterizados por anatomía acentuada para garantizar modificabilidad para el empleo en todas las técnicas de montaje. Ángulo de las cúspides: 25°-33°.


D33 A

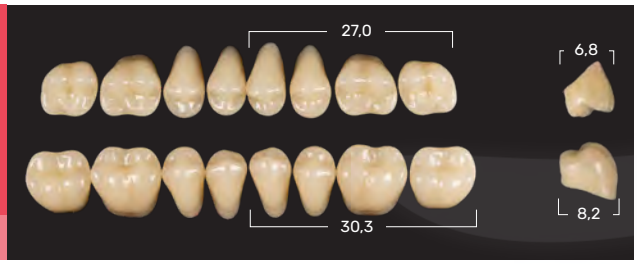


D35 A

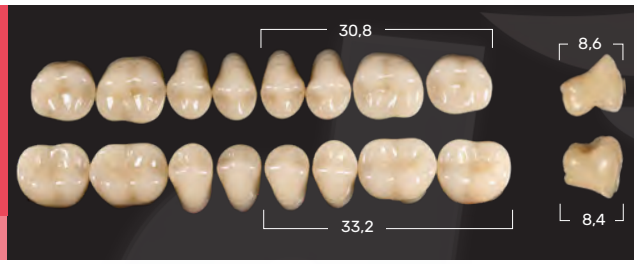

D42 G

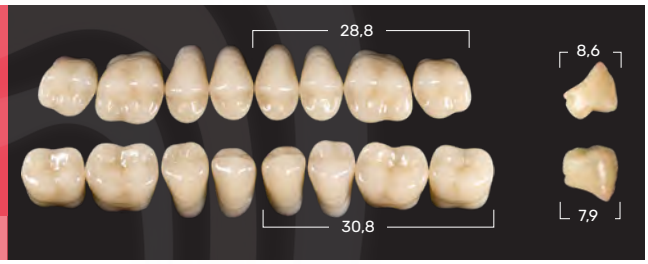


D36 A

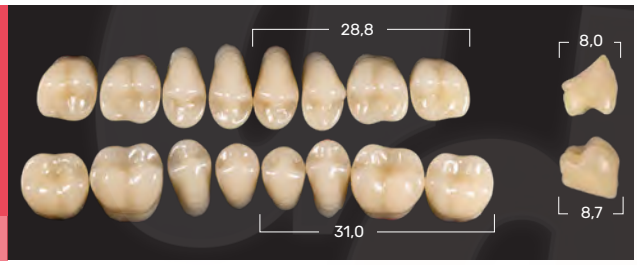


D43 G




D37 A

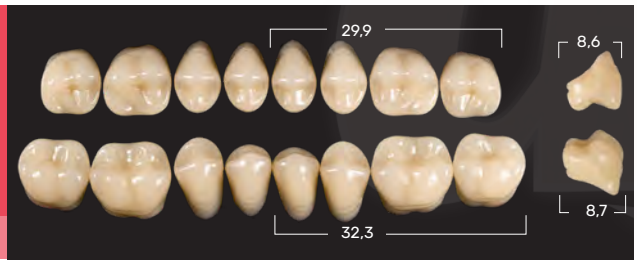


D44 G

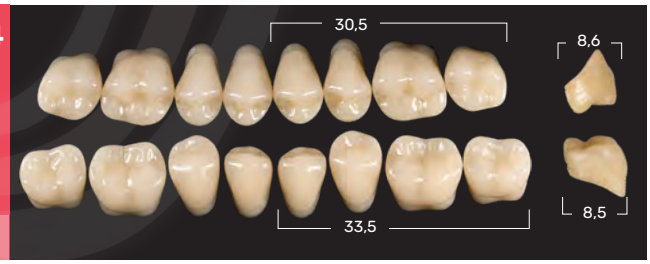

D39 A

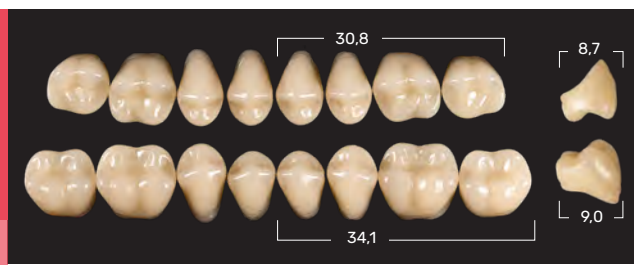


D45 G

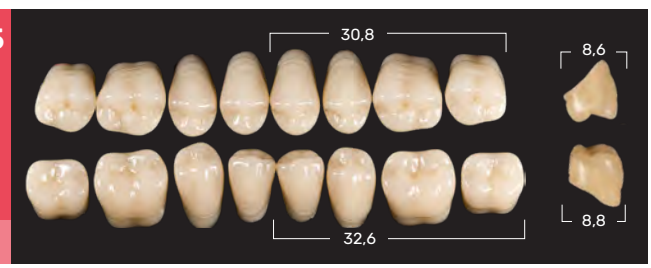

D41 A



D46 G

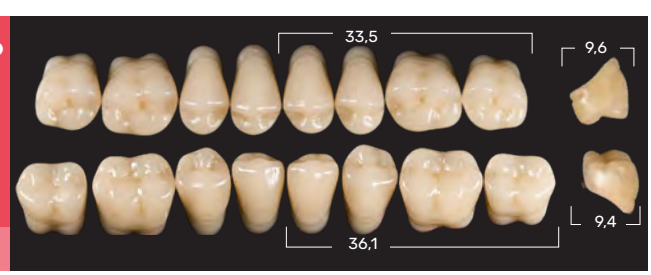

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es