

Endo Smart +

Nueva generación de Motor Endo sin escobillas
Una nueva experiencia en el tratamiento endodóntico



GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.



6:1


Contra-ángulo super mini

El contra-ángulo súpermini permite un campo de operación más claro.

Modo de determinación de la longitud de trabajo combinado

Endo Smart+ puede conectarse al localizador apical simultáneo para realizar la función de localización del ápice.

Al conectar el Endo Smart+ al localizador de ápices simultáneo, se puede observar la posición de la punta de lima dentro del conducto durante el procedimiento y se pueden activar muchas funciones automáticas como el Auto Apical Reverse.

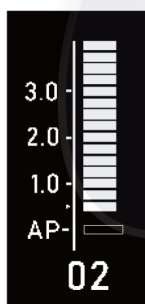


Apical Action Reverse	Apical Action Reverse/Stop/OFF
Auto Start ON	Auto Start ON/OFF
Auto Stop OFF	Auto Stop ON/OFF
Apical Slow Down ON	Apical Slow Down ON/OFF

Woodpex V

Ai-Pex




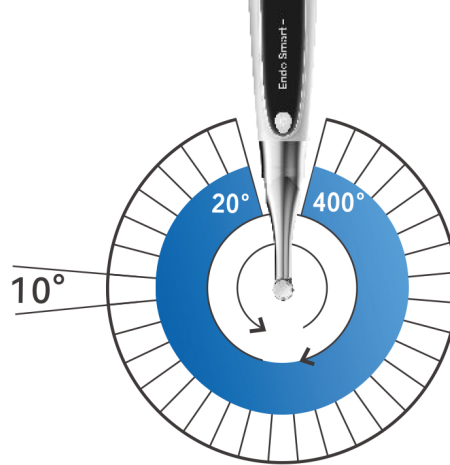

10° por cada unidad

Motor de alto rendimiento sin escobillas

- 1- Ángulo recíprocante ajustable
(intervalo de 10°; rango de ajuste: 20°- 400°);
reduce el riesgo de fractura de los instrumentos
y permite una mayor eficiencia en la preparación.
- 2- Elevado torque , alta velocidad, respuesta
rápida, salida más precisa , más estable,
para asegurar una preparación más eficiente y segura.
Velocidad :100- 1200RPM
Torque: 0.4-5.0N · cm
- 3- Rotación suave, menor ruido y baja vibración en la pieza de mano.
Reduce la fatiga de la mano durante la instrumentación.

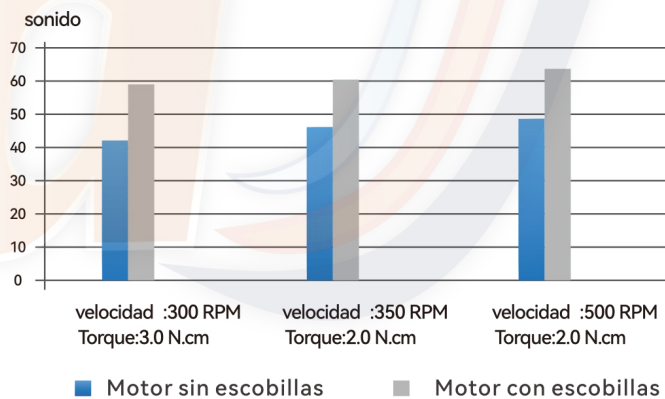

Contra-ángulo giratorio de 360°



Vida útil tres veces mayor



Más de 30 sistemas
rotatorios incorporados



Batería de litio de 2000mAh