



1° ENDO MOTOR sin escobillas
de Woodpecker

MotoPex

| Cabeza súper mini y cuello delgado |

Potente motor | Rotación precisa | Balance de peso



6:1

Contra-ángulo 6:1

360°


Contra-ángulo con
rotación 360°



Batería de litio
2000mAh



Centro de
gravedad delantero

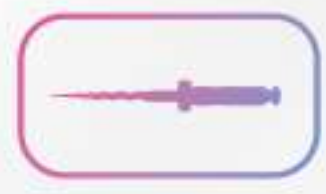

Compatible con todos
sistemas de limas
del mercado

Rango de velocidad: 100- 1200 RPM

Rango de torque: 0.4-5.0N.cm


Rango de ángulo ajustable recíprocante: 20° -400°




Motor sin escobillas de alto rendimiento

El ángulo recíprocante ajustable
(entre 20° y 340°, a intervalos de 10°)
reduce el riesgo de rotura de los
instrumentos y permite una mayor
eficiencia en la preparación.

10° por cada unidad

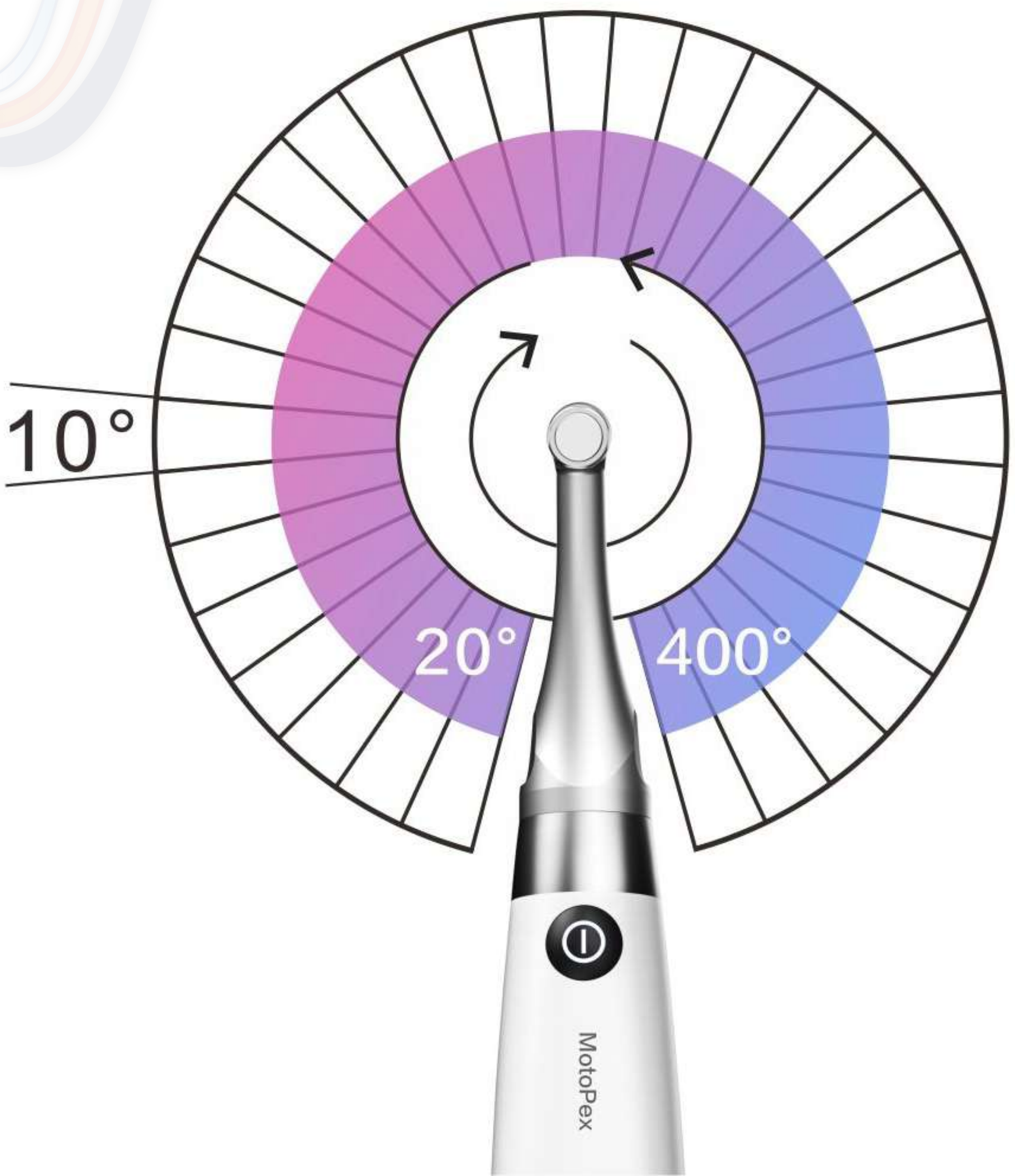


Su rotación suave y los bajos
niveles de ruido mejoran la
experiencia del paciente.

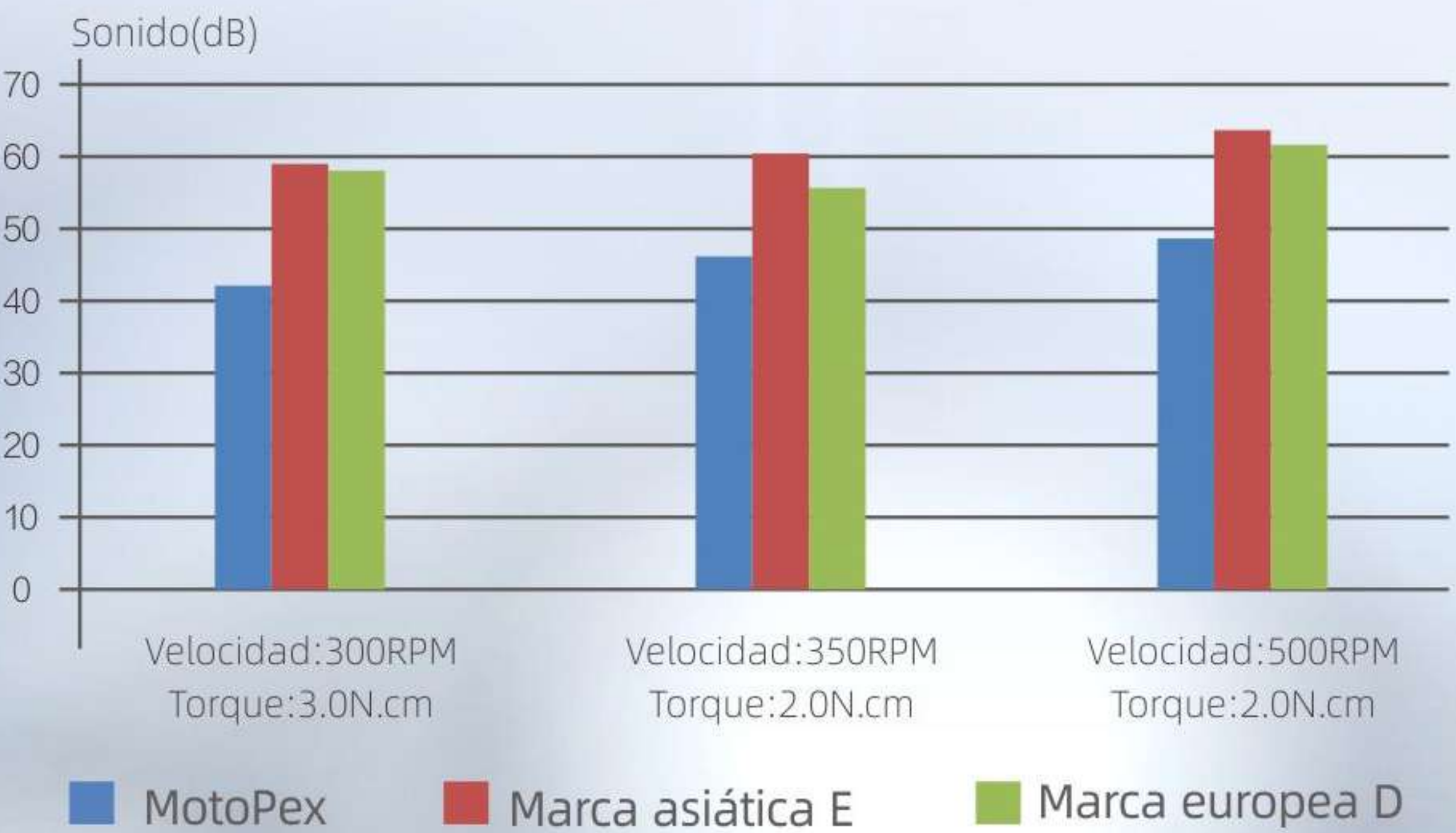


Súper Mini Contra-ángulo

La cabeza de reducido tamaño, con un diámetro de 8mm y una altura de 9,7mm brinda una mayor visión durante el proceso endodóntico.

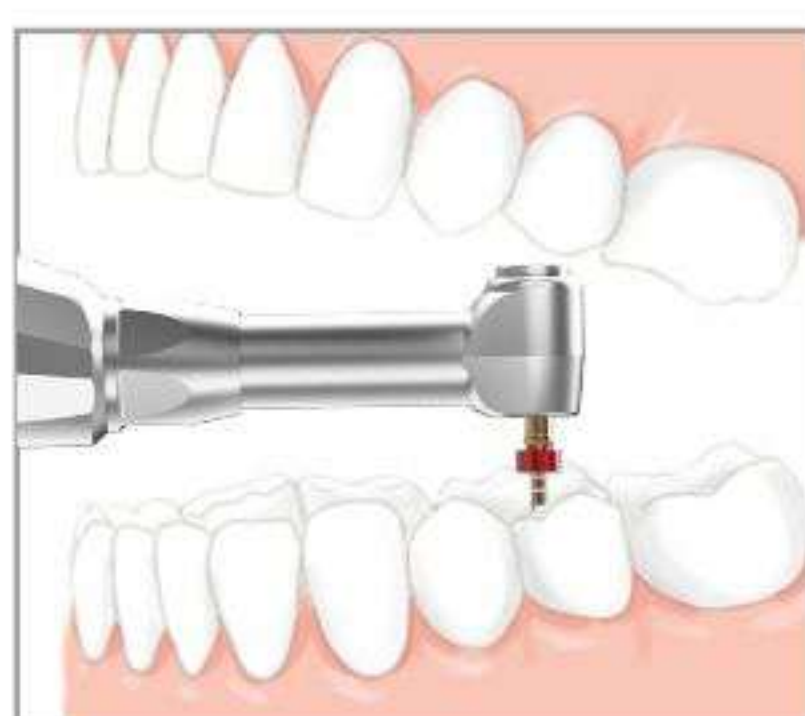

Cabeza y cuello de contra-ángulo normal

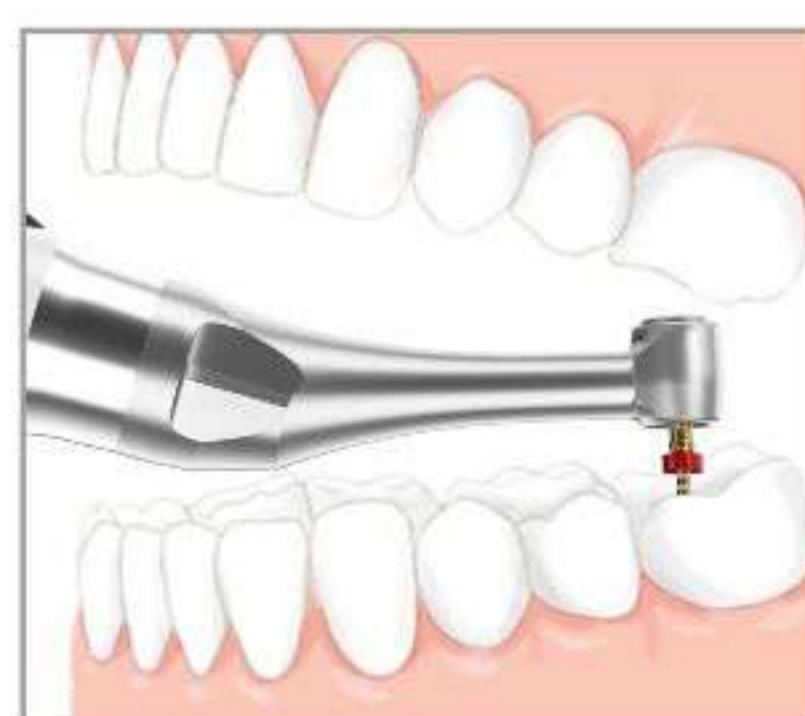

Cabeza súper mini y cuello delgado de contra-ángulo de Woodpecker



La mayor potencia de este motor, y su par de torsión estable, hacen que la preparación del canal radicular sea más eficaz.



Motor Endodoncia sin escobillas
=Motor Endodoncia con escobillas×10



Localizador de ápices incorporado

La determinación integrada de la longitud hace que el tratamiento endodóntico sea más seguro y eficiente.

Se muestra en tiempo real la ubicación dentro del canal radicular. El motor para automáticamente o rota en dirección opuesta tan pronto como la lima llega al tope apical, para prevenir la perforación.

Funciones de Auto Start y Auto Stop respectivamente permiten al motor comenzar automáticamente mientras la lima entra en el canal y parar cuando sale.

