

Motor Endo Brushless de Woodpecker

— Rediseñado para Expertos

Ai-Motor



Recomendado por

Yoshi Terachi



Altamente Recomendado por el
Endodoncista Internacional

Dr. Yoshi Terauchi

*"La cabeza de Ai-motor es muy pequeña en comparación con la de otros motores.
Puede cambiar el modo de rotación, la velocidad y las angulaciones según sus preferencias."*

Mini contra-ángulo

Preparación más sencilla de los dientes posteriores.
Campo quirúrgico más claro y amplio.

8.0 mm
Diámetro

9.7 mm
Altura

360°
Giro del
contrángulo



El modo de localizador de ápice integrado ofrece una protección segura

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd

Information Industrial Park, Guilin National High-Tech

Zone, Guilin, Guangxi, China


Sales Dept. +86-773-5817196

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

Reducción automática de la velocidad en un
ápice estrecho.

Retroceso y detención automática en el límite apical.

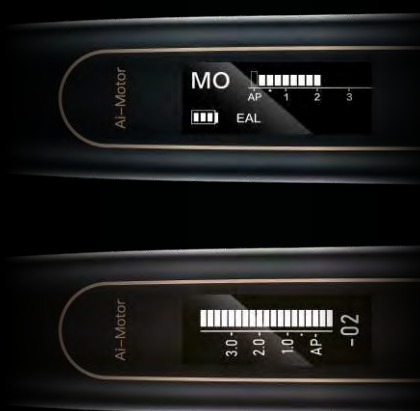

Modo de localizador
de ápice solo

Modo de localizador
de ápice integrado



Motor sin escobillas de alto rendimiento

(Vida útil cerca de 10 veces mayor a la de los
motores con escobillas.)

Se garantiza un corte estable en el ápice
estrecho o curvo.

Reduce el riesgo de separación de los
instrumentos y mejora la eficiencia en la
preparación.

Parámetros del producto

Velocidad	Batería
100-2500rpm	2000mAh
Torque	Configuración
0.4-5.0Ncm	Cable de medición ×1
	Clip de limas ×4
Modo de recarga	Gancho labial ×2
Carga inalámbrica	Sonda ×2

Modo de rebase del escalón

Realiza el movimiento "watch-winding" (re-bobinado) a 90° fijos antes de rebasar el escalón, y después de ese movimiento, se reciproca a un ángulo fijo de 180° sentido horario y 90° sentido anti horario.

La velocidad y el torque se pueden configurar respectivamente dentro del rango de 100-500RPM y 2,0-5,0N, los cuales permiten una preparación más segura.



Su funcionamiento estable permite una preparación eficiente



Ángulo recíprocante personalizado

Ajuste del ángulo de rotación en modo
recíprocante

20°-400°
Rango de ajuste

10°
Intervalo de ajuste

